

CAVEX

INSTRUCTIONS



CAVEX
Bite&White

Professional Home Whitening System

READY 2 USE







Instructions Quick Reference Chart (page 3)

	1	2	3
	Poets het gebit grondig	Scheur de folieverpakking open	Breng de bleeklepel aan in de mond
	Das Gebiss gründlich putzen	Reißen Sie die Folienverpackung auf	Den Bleichlöffel im Mund anbringen
	Lavez-vous soigneusement les dents	Déchirez le film d'emballage pour l'ouvrir	Insérez la gouttière de blanchiment dans la bouche
	Brush your teeth thoroughly	Tear open the foil packaging	Insert the bleaching tray into your mouth
	Lavarsi bene i denti	Rompere la pellicola della confezione	Inserire la mascherina sulla apposita arcata
	Cepílese los dientes a fondo	Abra la lámina protectora	Coloque la cubeta de blanqueamiento en la boca
	Temeljito operite zube	Otvorite folijsko pakovanje	Umetnите udlagu sa sredstvom za izbjeljivanje u usta
	Børst tænderne grundigt	Riv folieindpakningen åben	Sæt blegeskeen på tænderne
	Mossa meg alaposan a fogát	Tépje fel a fóliacsomagolást	Helyezze a fehérítőtálcát a szájába
	Zęby należy dokładnie umyć	Opakowanie foliowe należy rozerwać	Wprowadź lyżeczkę wybielającą do jamy ustnej
	Escove muito bem os dentes	Rasgue a embalagem de plástico para abrir	Introduza o molde de branqueamento na boca
	Borstä tänderna noga	Riv upp plastförpackningen	För blekningsskenan mot tänderna
	Dişlerinizi iyice fırçalayın	Film ambalajını yırtarak açınız	Diş kalibini ağızınızın içeresine yerleştirin
	Bouρτσίστε πολύ καλά τα δόντια	Aνοίξτε σχίζοντας την προστατευτική μεμβράνη	Βάλτε το δισκάριο λεύκανσης στο στόμα
	Тщательно почистьте зубы	Чтобы открыть упаковку, разорвите пленку	Наденьте каппу для отбеливания на зубы
	将牙齿彻底刷一遍	撕开包装薄膜。	将漂白牙套放入口腔
	치아를 고석고석 잘 닦는다.	알루미늄 호일 포장을 젖어 개봉한다.	미백트레이를 입에 끼운다.
	تنظيف أسنانك جيداً بالفرشة	مزق غشاء التعبية لفتحه.	ضع ملعقة خرز اللون في الفم

Instructions Quick Reference Chart (page 3)

	4	5	6	Extended Instructions see page
(NL)	Bleek gedurende minimaal ½ uur	Spoel de mond met water	Wacht tenminste een 0,5 uur en poets dan voorzichtig de tanden	4
(D)	Mindestens ½ Stunde bleichen	Den Mund mit Wasser ausspülen	Mindestens eine halbe Stunde warten und dann die Zähne vorsichtig putzen	5
(F)	Blanchir pendant au moins une demi-heure	Rincez-vous la bouche à l'eau	Attendez au moins ½ heure avant de vous laver les dents délicatement	6
(GB)	Bleach for at least half an hour	Rinse your mouth with water	Wait at least 30 minutes and then brush your teeth carefully	7
(I)	Sbiancare per almenomezz'ora	Risciacquare la bocca con acqua	Attendere almeno mezz'ora e lavarsi i denti con delicatezza	8
(E)	Blanqueo durante al menos media hora	Enjuáguese la boca con agua	Espere al menos 0,5 hora y cepíllese los dientes suavemente	9
(HR)	Izbjeljivajte tijekom minimalno ½ sata	Isperite usta vodom	Pričekajte najmanje pola sata, onda oprezno operite zube	10
(DK)	Blege i mindst ½ time	Skyl munden med vand	Vent mindst 0,5 time og børst nu tænderne forsigtigt	11
(H)	Legalább fel óráig fehérítse	Öblítse ki a száját vizsel	Várjon legalább fél órát, majd óvatosan mosza meg a fogát	12
(PL)	Wybielać co najmniej przez pół godziny	Splukać jamę ustną wodą	Należy odczekać przynajmniej 0,5 godziny, po czym ostrożnie umyć zęby	13
(P)	Deixar atuar pelo menos durante meia hora	Enxague a boca com água	Espere no mínimo meia hora e escove cuidadosamente os seus dentes	14
(S)	Blek i minst en halvtimme	Skölj munnen med vatten	Vänta i minst en halvtimme och borsta sedan tänderna försiktigt	15
(TR)	En az yarım saat boyunca beyazlatınız	Ağızınızı su ile çalkalayın	En az yarım saat bekledikten sonra dikkatlice dişlerinizi fırçalayın	16
(GR)	Λευκάνετε τουλάχιστον επί μισή ώρα	Ξεπλύνετε το στόμα με νερό	Περιμένετε επί μισή ώρα τουλάχιστον και βοιτρίστε έπειτα προσεχτικά τα δόντια	17
(RUS)	Для отбеливания необходимо не менее ½ часа	Прополощите рот водой	По истечении не менее получаса осторожно почистьте зубы	18
(CN)	漂白至少需要半个小时	用水漱口	等候至少半小时，然后小心地刷牙	19
(KOR)	최소 30분간 표백	물로 입을 헹군다.	30분 이상 기다린 후 조심스럽게 양치질을 한다.	20
(SA)	وأصل للبيض لمدة لا تقل عن نصف ساعة	اشطف الفم بالماء	انتظر نصف ساعة على الأقل ثم نظف أسنانك بحرص بالفرشة	21

Quick Reference Chart

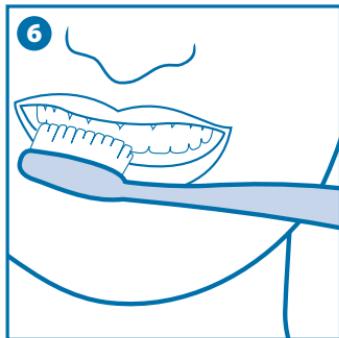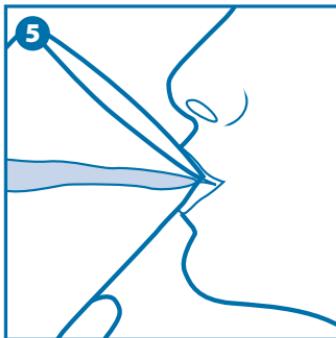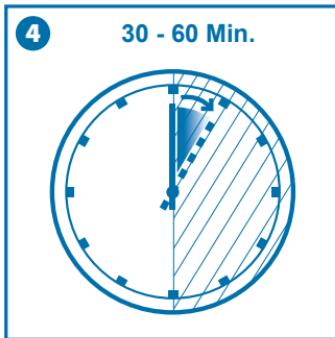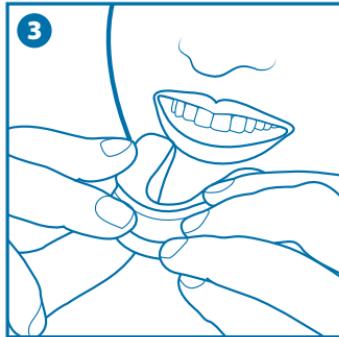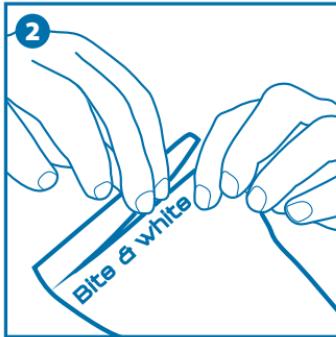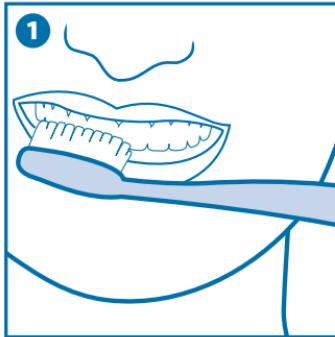



OMSCHRIJVING

Waterstofperoxide dient als bleekmiddel in Cavex Bite&White Ready 2-Use. Het wordt deels toegevoegd als carbamideperoxide om een voldoende stabiel product te verkrijgen. De carbamideperoxide lost snel op in zuurstofradicalen en water. Tijdens het bleekproces vallen de vrije radicalen de dubbele koolstofverbindingen aan; deze vormen meestal de bron van tandverkleuring.

VERPAKKING

- Cavex Bite&White Ready 2 Use, 6 voor gevulde bleektrays vacuum verpakt.

SAMENSTELLING

Actieve bestanddelen:

- 6 % Waterstof peroxide (deels als Carbamide peroxide)
- 0,2% Kaliumnitraat

INDICATIES VOOR GEBRUIK

Cavex Bite&White Ready 2 Use is een gel om tanden wit te kleuren, waarbij de kleur van natuurlijke tanden wordt gebleekt. Cavex Bite&White Ready 2 Use mag alleen in opdracht van een tandheelkundige worden verstrekt. Een consult bij een bevoegde tandarts vóór elke bleekbehandeling wordt aanbevolen om mond- of gezondheidsproblemen uit te sluiten.

CONTRA-INDICATIES

Er wordt aanbevolen om in onderstaande gevallen een arts te raadplegen:

- bij zwangere vrouwen, en vrouwen die borstvoeding geven;
- bij personen die worden behandeld voor een ernstige ziekte;
- bij kinderen jonger dan 18 jaar.

KLINISCHE PROCEDURE

- Leg de uitgangskleur vast, evalueer de huidige gezondheid van het gebit en zorg er voor dat de verwachtingen van de patiënt over het eindresultaat realistisch zijn.
- Provisorische of tijdelijke gebitsrestauraties kunnen tijdens het bleekproces verkleuren, terwijl composit- of polycarbonaat materiaal niet wordt beïnvloed. Daarom dient aan

patiënten met compositrestauraties te worden meegedeeld dat bestaande composieten wellicht moeten worden vervangen, aangezien alleen natuurlijke tanden witter worden.

- Wacht bij patiënten die een esthetische of adhesieve restauratie nodig hebben, 2 weken na de laatste bleekbehandeling; de kleur kan zich dan stabiliseren. Alle restauraties dienen intact te zijn, of goed gesmeerd met de juiste tijdelijke materialen.
- Het gebruik van een tandpasta voor gevoelige tanden, 2 weken voor de behandeling tot 2 weken daarna, dient te worden aanbevolen.
- U dient de patiënt altijd te waarschuwen voor gevoeligheid van de tanden of geirriteerd tandvlees tijdens de behandeling. Het tandvlees dat met het middel in aanraking komt, kan rood of wit worden, maar neemt na enkele dagen de normale kleur weer aan.
- Adviseer de patiënt - om irritatie van zacht weefsel te voorkomen - om overtollige gel weg te vegen aan de grens van het tandvlees en om de mond na de behandeling grondig te spoelen.
- De patiënt mag minstens 30 minuten na elke behandeling niet eten, drinken of roken.
- Instrueer de patiënt om de behandeling te stoppen en onmiddellijk contact met u op te nemen als zich een probleem voordoet.
- De uiteindelijke kleur komt circa 1 week na het beëindigen van de behandeling tot stand.

WAARSCHUWINGEN

- Bevat waterstofperoxide.
- Vermijl contact met de ogen.
- Buiten bereik van kinderen houden.
- Niet gebruiken bij overgevoelige tanden.
- Niet eten, drinken of roken tijdens het dragen van de trays.
- Gevaarlijk bij inslikken.

INSTRUCTIES VOOR EERSTE HULP

- Als een groot deel is ingeslikt: onmiddellijk water drinken, braken niet opwekken en een arts raadplegen.
- Indien er gel in de ogen komt: oogleden openentrekken, het oog minstens 15 minuten achter elkaar met water spoelen en een arts raadplegen.
- Bij contact met kleding, huid of haar: aangetaste kleding verwijderen en huid of haar onder een lopende kraan spoelen.

MOGELIJKE NADELIGE EFFECTEN

Nadelige effecten die kunnen samenhangen met het gebruik van Cavex Bite&White Ready 2 Use zijn onder andere, maar niet uitsluitend:

Gevoeligheid

Sommige patiënten kunnen tijdens de behandeling een overgenomen gevoeligheid van de tanden voor kou ervaren; anderen kunnen een niet-specifieke gevoeligheid ervaren in tanden, tandvlees, tong, lippen of keel. In het algemeen dienen de symptomen enkele dagen na beëindiging van de behandeling te verdwijnen. De behandeling kan worden voortgezet met kortere, minder frequente applicaties totdat het gewenste bleekeffect is bereikt. Als het ongemak blijft, dient de behandeling te worden beëindigd.

Irritatie van het tandvlees

Trays die zich uitstrekken tot het tandvlees, kunnen een matige tot ernstige irritatie van zacht weefsel veroorzaken.

BEWaarADVIES

- Bewaar in de koelkast (<8°C)
- Gebruik het materiaal niet na overschrijding van de houdbaarheidsdatum.

VERWIJDERING

- Verwijder het product conform de lokale afvalregels.

*Your impression is our concern
Geproduceerd in Nederland*

Onze adviezen met betrekking tot de technische toepassing in woord, geschrift of door middel van proeven worden naar beste weten verstrekt, doch gelden slechts als vrijblijvende aanwijzingen, ook ten aanzien van eventuele beschermende rechten van derden. Zij ontslaan u niet van de verplichting, de door ons geleverde producten op hun geschiktheid voor de beoogde procedé's en doeleinden te controleren.

Toepassing, gebruik en verwerking van de producten vinden plaats buiten onze controlesmogelijkheden. Zij vallen derhalve onder uw eigen verantwoordelijkheid. In geval van enige aansprakelijkheid blijft deze, voor alle schadegevallen, beperkt tot de waarde van de door ons geleverde en door u gebruikte goederen. Vanzelfsprekend garanderen wij de goede kwaliteit van onze producten, e.e.a. volgens de in onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden genoemde maatstaven.



Gebrauchsanweisung

BESCHREIBUNG

Wasserstoffperoxid dient als Bleichmittel in Cavex Bite&White Ready 2 Use. Es wird teilweise als Carbamidperoxid beigesetzt, um ausreichende Produktstabilität zu erhalten. Das Carbamidperoxid löst sich schnell in Sauerstoffradikalen und Wasser auf. Während des Bleichprozesses greifen die freien Radikalen die doppelten Kohlenstoffverbindungen an und sorgen so für die Aufhellung.

PACKUNGSEINHEIT

- Cavex Bite&White Ready 2 Use, 6 vakuumverpackte, vorgefüllte Bleichschienen.

ZUSAMMENSETZUNG

Aktive Bestandteile:

- 6,0 % Wasserstoffperoxid (teilweise als Carbamidperoxid)
- 0,2 % Kaliumnitrat

VERWENDUNG

Cavex Bite&White Ready 2 Use ist ein Gel zur Aufhellung natürlicher Zähne. Das Produkt darf ausschließlich über den Zahnarzt abgegeben werden. Vor jeder Bleichbehandlung wird eine Beratung durch einen behandelnden Zahnarzt empfohlen.

GEGENANZEIGEN

In folgenden Fällen wird empfohlen, ärztlichen Rat einzuholen:

- bei schwangeren und stillenden Frauen;
- bei Personen, die wegen einer ernsthaften Erkrankung behandelt werden;
- bei Kindern unter 18 Jahren.

ANWENDUNG

- Legen Sie die Ausgangsfarbe fest, bewerten Sie die Gesundheit des Gebisses und klären Sie die die realistischen Möglichkeiten der Aufhellung.
- Provisorische Füllungen können sich beim Bleichprozess verfärbaren, während Komposit- oder Polycarbonatmaterial nicht beeinflusst wird. Deshalb muss Patienten mit Kompositrestaurierungen mitgeteilt werden,

dass diese eventuell ersetzt werden müssen, da nur die natürlichen Zähne weißer werden.

- Warten Sie bei Patienten, die eine neue Restauration benötigen, bis 2 Wochen nach der letzten Bleichbehandlung verstrichen sind. Die Farbe kann sich dann stabilisieren. Alle Restaurationen müssen intakt, oder mit den richtigen provisorischen Materialien versorgt sein.
- Die Verwendung einer Zahnpaste für empfindliche Zähne ist 2 Wochen vor bis 2 Wochen nach der Behandlung zu empfehlen.
- Weisen Sie den Patienten ausdrücklich auf die Möglichkeit von Zahnenempfindlichkeit, oder gereztem Zahnfleisch während der Behandlung hin. Das Zahnfleisch, das mit dem Bleichmittel in Berührung kommt, kann sich rot oder weiß verfärbten, nimmt aber nach einigen Tagen wieder seine normale Farbe an.
- Empfehlen Sie dem Patienten, übergeschüssiges Gel am Zahnfleischrand wegzuwischen und den Mund nach der Behandlung gründlich zu spülen, um Reizungen der Schleimhaut zu verhindern.
- Der Patient darf mindestens 30 Minuten nach jeder Behandlung weder essen noch trinken oder rauchen.
- Weisen Sie den Patienten darauf hin, die Behandlung abzubrechen und sich unverzüglich mit Ihnen in Verbindung zu setzen, wenn ein Problem auftritt.
- Die endgültige Farbe ist etwa 1 Woche nach Beendung der Behandlung zu sehen.

WARNUNGEN

- Enthält Wasserstoffperoxid.
- Augenkontakt vermeiden.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren.
- Nicht bei überempfindlichen Zähnen verwenden.
- Während des Tragens der Schienen nicht rauchen, trinken oder essen.
- Gefahr beim Verschlucken.

ANWEISUNGEN ZUR ERSTEN HILFE

- Wenn eine größere Menge Bleichgel verschluckt wurde: sofort Wasser trinken, kein Erbrechen hervorrufen und einen Arzt aufsuchen.
- Wenn Gel in die Augen gelangt: Augenlider nach oben ziehen, das Auge mindestens 15 Minuten ununterbrochen mit Wasser spülen und einen Arzt aufsuchen.
- Bei Kontakt mit Kleidung, Haut oder Haar: verschmutzte Kleidung entfernen und Haut oder Haar unter fließendem Wasser spülen.

MÖGLICHE NEBENWIRKUNGEN

Im Zusammenhang mit dem Gebrauch von Cavex Bite&White Ready 2 Use können unter anderem - aber nicht ausschließlich – folgende Nebenwirkungen auftreten:

Empfindlichkeit der Zähne

Manche Patienten empfinden während der Behandlung eine erhöhte Empfindlichkeit der Zähne gegen Kälte; bei anderen kommt es zu einer nicht spezifischen Empfindlichkeit der Zähne, des Zahnfleisches, der Zunge oder des Rachens. Im Allgemeinen müssen die Symptome einige Tage nach Beendung der Behandlung verschwinden. Die Behandlung kann mit kürzeren, weniger frequenten Anwendungen fortgesetzt werden, bis die gewünschte Bleichwirkung erreicht wurde. Wenn die Beschwerden andauern, muss die Behandlung beendet werden.

Reizung des Zahnfleisches

Schienen, die bis über das Zahnfleisch reichen, können eine mäßige bis ernsthafte Reizung des Zahnfleisches verursachen.

LAGERUNG

- Im Kühlschrank aufbewahren (<8°C)
- Material nach Überschreiten des Haltbarkeitsdatums nicht mehr verwenden.

ENTSORGUNG

- Entsorgen Sie das Produkt entsprechend den lokalen Abfallvorschriften.

*Your impression is our concern
Hergestellt in den Niederlanden*

Unsre anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Sollte dennoch eine Haftung in Frage kommen, so ist diese für alle Schäden auf den Wert der von uns gelieferten Ware beschränkt. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Massgabe unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

**DESCRIPTION**

Dans Cavex Bite&White Ready 2 Use, l'agent de blanchiment est le peroxyde d'hydrogène. Il est en partie ajouté sous forme de peroxyde de carbamide pour obtenir une stabilité suffisante du produit. Le peroxyde de carbamide se dissout rapidement en radicaux d'oxygène et en eau. Au cours du processus de blanchiment, les radicaux libres attaquent les doubles liaisons de carbone, qui constituent généralement la source de la décoloration des dents.

EMBALLAGE

- Cavex Bite&White Ready 2 Use, 6 gouttières de blanchiment pré-remplies emballées sous vide.

COMPOSITION

Composants actifs :

- 6 % Peroxyde d'hydrogène (en partie sous forme de peroxyde de carbamide)
- 0,2 % Nitrate de potassium

INDICATIONS D'UTILISATION

Cavex Bite&White Ready 2 Use est un gel pour blanchir les dents, qui blanchit la couleur des dents naturelles. Cavex Bite&White Ready 2 Use ne peut être fourni que sur prescription d'un dentiste. Pour éviter tout problème de bouche ou de santé, une consultation auprès d'un dentiste qualifié avant chaque traitement de blanchiment est recommandée.

CONTRE-INDICATIONS

Dans les cas suivants, il est recommandé de consulter un médecin :

- les femmes enceintes et femmes qui allaient ;
- les personnes suivant un traitement pour une maladie grave ;
- les enfants de moins de 18 ans.

PROCÉDURE CLINIQUE

- Enregistrez la teinte initiale, évaluez la santé actuelle de la dentition et assurez-vous que les attentes du patient à l'égard du résultat final soient现实的.
- Des restaurations provisoires ou temporaires des dents peuvent se décolorer durant le

processus de blanchiment, mais un matériau composite ou polycarbonate ne sera pas influencé. C'est pourquoi les patients ayant subi des restaurations composites doivent être informés du fait que les composites existants devront peut-être remplacés, étant donné que seules les dents naturelles deviennent plus blanches.

- Chez les patients qui ont besoin d'une restauration esthétique ou adhésive, attendez 2 semaines après le dernier traitement de blanchiment, pour permettre à la couleur de se stabiliser. Toutes les restaurations doivent être intactes ou correctement scellées avec les matériaux temporaires adéquats.
- L'utilisation d'un identifieur pour dents sensibles, 2 semaines avant et 2 semaines après le traitement, doit être conseillée.
- Vous devez toujours prévenir le patient de la sensibilité des dents ou d'une gencive irritée durant le traitement. La gencive qui entre en contact avec le produit peut devenir rouge ou blanche, mais retrouvera une couleur normale au bout de quelques jours.
- Pour éviter une irritation des tissus mous, conseillez au patient d'essuyer le gel superflu au bord de la gencive et de se rincer la bouche soigneusement après le traitement.
- Le patient doit s'abstenir de manger, boire et fumer durant au moins 30 minutes après chaque traitement.
- Demandez au patient de stopper le traitement et de vous contacter immédiatement en cas de problème.
- La couleur est définitive environ 1 semaine après la fin du traitement.

AVERTISSEMENTS

- Contient du peroxyde d'hydrogène.
- Éviter le contact avec les yeux.
- Ne pas laisser à la portée des enfants.
- Ne pas utiliser sur des dents hypersensibles.
- Ne pas manger, boire ou fumer durant le port des gouttières.
- Nocif en cas d'ingestion.

INSTRUCTIONS PREMIERS SECOURS

- Lorsqu'une grande quantité a été avalée : boire immédiatement de l'eau, ne pas provoquer de vomissements et consulter un médecin.
- En cas de contact du gel avec les yeux : rincer l'œil à l'eau durant au moins 15 minutes sans interruption en écartant bien les paupières et consulter un médecin.
- En cas de contact avec un vêtement, la peau ou les cheveux : enlever le vêtement souillé et rincer la peau ou les cheveux à l'eau courante.

EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES

L'utilisation de Cavex Bite&White Ready 2 Use peut s'accompagner d'effets indésirables qui peuvent être les suivants (cette liste n'étant pas exhaustive) :

Sensibilité

Durant le traitement, certains patients peuvent ressentir une sensibilité accrue des dents au froid ; d'autres peuvent ressentir une sensibilité non spécifique des dents, des gencives, de la langue, des lèvres ou de la gorge. D'une façon générale, les symptômes doivent disparaître quelques jours après la fin du traitement. Le traitement peut être continué par des applications plus courtes, moins fréquentes, jusqu'à ce que l'effet de blanchiment désiré soit atteint. Si les inconvenients persistent, le traitement doit être cessé.

Irritation de la gencive

Les gouttières qui s'étendent jusqu'à la gencive peuvent provoquer une irritation modérée à sérieuse des tissus mous.

CONSEIL DE CONSERVATION

- Conserver au réfrigérateur (< 8°C)
- Ne pas utiliser le produit après expiration de la date limite d'utilisation.

ÉVACUATION

- Évacuer le produit conformément aux réglementations locales en matière d'élimination des déchets.

Your impression is our concern

Fabriqué aux Pays-Bas

Les conseils que nous vous donnons verbalement ou par écrit dans le cadre de notre assistance technique et de nos essais n'engagent pas notre responsabilité - même en ce qui concerne d'éventuels droits de tiers en matière de propriété industrielle - et ne vous dispensent pas de la nécessité de vérifier par des essais pratiques si nos produits conviennent aux procédés et applications que vous envisagez.

L'utilisation, la mise en œuvre et la transformation des produits fournis échappent à notre contrôle et relèvent, dès lors, exclusivement de votre responsabilité. Si notre responsabilité devait néanmoins se trouver engagée, elle se limiterait, pour tous les dommages, à la valeur de la marchandise fournie par nous et mise en œuvre par vos soins. Bien entendu, nous garantissons la qualité irréprochable de nos produits dans le cadre de nos conditions générales de vente et de livraison.



Instructions for use

DESCRIPTION

Hydrogen peroxide functions as a bleaching agent in Cavex Bite&White Ready 2 Use. It is partly added as a carbamide peroxide to ensure sufficient product stability. Carbamide peroxide is quickly dissolved in oxygen radicals and water. During the bleaching process, the free radicals attack the double carbon compounds, which are the source of tooth discolouration most of the time.

PACKAGING

- Cavex Bite&White Ready 2 Use, 6 pre-filled bleaching trays in a vacuum packaging.

COMPOSITION

Active ingredients:

- 6 % Hydrogen peroxide (partly as carbamide peroxide)
- 0.2% Potassium nitrate

INDICATIONS FOR USE

Cavex Bite&White Ready 2 Use is a gel for whitening the teeth, whereby the colour of natural teeth is bleached. Cavex Bite&White Ready 2 Use may only be supplied by prescription from a dentist. To avoid any mouth or health problems, a consultation with a qualified dentist is recommended before any bleaching treatment.

CONTRA-INDICATIONS

It is recommended that a doctor be consulted in the following cases:

- pregnant and breast-feeding women;
- persons who are being treated for a serious ailment;
- children under the age of 18.

CLINICAL PROCEDURE

- Register the starting colour, evaluate the present health of the teeth and make sure that the expectations of the patient about the final result are realistic.
- Provisional or temporary restorations of the teeth may discolour during the bleaching process; compound or polycarbonate material, however, is not affected. Therefore, patients who have undergone composite

restorations need to be informed that existing composites may have to be replaced, since it is only natural teeth that become whiter.

- Wait two weeks after the most recent bleaching treatment of patients who are in need of an aesthetic or adhesive restoration, allowing the colour to stabilize. All restorations should be intact or properly sealed using the correct temporary materials.
- The use of a tooth paste for sensitive teeth - 2 weeks prior to, and 2 weeks after treatment - should be recommended.
- You should always notify the patient about the sensitivity of the teeth or irritated gingiva during the treatment. The gingiva that comes into contact with the agent may become red or white but will assume a normal colour after a few days.
- To avoid irritation of soft tissue, you should advise the patient to wipe away superfluous gel at the edge of the gingiva, and to rinse the mouth thoroughly after treatment.
- The patient is not allowed to eat, drink or smoke for at least 30 minutes after each treatment.
- Instruct the patient to stop the treatment and to contact you immediately if there is a problem.
- The final colour is achieved approx. 1 week after completion of the treatment.

WARNINGS

- Product contains hydrogen peroxide.
- Avoid contact with the eyes.
- Keep out of reach of children.
- Do not use for overly sensitive teeth.
- Do not eat, drink or smoke when carrying the trays.
- Harmful when swallowed.

FIRST AID INSTRUCTIONS

- If a large amount was swallowed: drink water immediately, do not induce vomiting and consult a doctor.
- If gel has accessed the eyes: pull the eye lids open, rinse the eye with water for at least

15 minutes without interruption and consult a doctor.

- In case of contact with clothing, skin or hair: remove impacted clothing and rinse skin or hair under a running tap.

POSSIBLE SIDE-EFFECTS

Side-effects that might coincide with the use of Cavex Bite&White Ready 2 Use may be the following, though not exclusively:

Sensitivity

During treatment, some patients may experience an increased sensitivity or coldness of the teeth; others may experience a non-specific sensitivity in the teeth, gingiva, tongue, lips or throat. Generally, the symptoms should disappear a few days after the treatment has ended. The treatment may be continued through shorter and less frequent applications until the desired bleaching effect has been reached. If the inconvenience persists, the treatment should be terminated.

Irritation of the gingiva

Trays that extend up to the gingiva may cause a moderate to serious irritation of soft tissue.

STORAGE ADVICE

- Store in refrigerator (<8°C)
- Do not use the material after expiration of the advised shelf life.

DISPOSAL

- Dispose of the product in keeping with local waste disposal regulations.

Your impression is our concern Produced in the Netherlands

Our technical advice, whether verbal, in writing or by way of trials, is given in good faith but without warranty, and this also applies where proprietary rights of third parties are involved. It does not release you from the obligation to test the products supplied by us as to their suitability for the intended processes and uses.

The application, use and processing of the products are beyond our control and, therefore, entirely your own responsibility. Should, in spite of this liability be established for any damage, it will be limited to the value of the goods delivered by us and used by you. We will, of course, provide consistent quality of our products within the scope of our General Conditions of Sale and Delivery.



Istruzioni per l'uso

CAVEX

Bite&White READY 2 USE

DESCRIZIONE

L'acqua ossigenata contenuta in Cavex Bite&White Ready 2 Use agisce come agente sbiancante. Viene aggiunta in parte come perossido di carbamide, per ottenere un prodotto sufficientemente stabile. Il perossido di carbamide si scioglie rapidamente nei radicali dell'ossigeno e nell'acqua. Durante il processo di sbiancamento, i radicali liberi attaccano i legami di carbonio, che, solitamente, sono la causa dell'ingrigiamento dei denti.

CONEZIONE

- Cavex Bite&White Ready 2 Use, 6 portaimpronta di sbiancamento pronti per l'uso confezionati sottovuoto.

COMPOSIZIONE

Componenti attivi:

- 6 % acqua ossigenata (in parte come perossido di carbamide)
- 0,2% nitroato di potassio

INDICAZIONI PER L'USO

Cavex Bite&White Ready 2 Use è un gel per sbiancare il colore dei denti naturali. Può essere fornito unicamente su richiesta di un dentista. Per escludere eventuali problemi di salute generale o del cavo orale, si consiglia di richiedere un consulto presso un dentista qualificato prima della sbiancamento.

CONTROINDICAZIONI

Si consiglia di rivolgersi a un medico nei seguenti casi:

- donne in stato di gravidanza e durante l'allattamento;
- persone sottoposte a terapia medica per una malattia grave;
- bambini al di sotto dei 18 anni.

PROCEDURA CLINICA

- Determinare il colore di partenza, valutare la salute attuale dei denti e assicurarsi che le aspettative del cliente relativamente ai risultati finale siano realistiche.
- Restauri provvisori o temporanei possono scolorire durante il trattamento, mentre il materiale composito o il policloruro

rimangono inalterati. Per tale motivo, ai pazienti con restauri in materiali compositi si deve fare presente che tali composti probabilmente devono essere sostituiti in quanto solo i denti naturali diventano più bianchi.

- Nel caso di pazienti che necessitano di un restauro cosmetico o adesivo, attendere due settimane prima dell'ultimo trattamento, per dare modo al colore di stabilizzarsi. Tutti i restauri devono essere intatti o ben sigillati con i giusti materiali provvisori.
- Si deve consigliare l'uso di un dentifricio per denti sensibili, da due settimane prima del trattamento fino a due settimane dopo il trattamento.
- Si deve sempre avvertire il paziente che, durante il trattamento, si potranno avverire una possibile sensibilità dei denti o un'irritazione delle gengive. La gengiva che viene a contatto con il liquido può diventare rossa o bianca, ma dopo qualche giorno ritorna al colore normale.
- Per prevenire un'irritazione dei tessuti molli, consigliare al paziente di togliere il gel in eccesso lungo il bordo della gengiva e di sciacquare bene la bocca dopo il trattamento.
- Il paziente non può bere, mangiare o fumare per almeno 30 minuti dopo ogni trattamento.
- In caso di problemi, il cliente deve interrompere il trattamento e contattare immediatamente il dentista.
- Il colore finale diventa visibile circa 1 settimana dopo la fine del trattamento.

AVVERTENZE

- Contiene acqua ossigenata.
- Evitare il contatto con gli occhi.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non usare in caso di denti sensibili.
- Quando si fa uso dei portaimpronta, non bere, mangiare o fumare.
- Pericoloso: non ingerire.

ISTRUZIONI DI PRONTO SOCCORSO

- Se gran parte del gel viene ingerito, bere immediatamente acqua, non provocare il vomito e consultare un medico.
- Se il gel viene a contatto con gli occhi: aprire le palpebre, sciacquare l'occhio per almeno 15 minuti consecutivi e consultare un medico.
- In caso di contatto con abiti, cute o capelli: togliere gli abiti contaminati e sciacquare cute e capelli sotto l'acqua corrente.

POSSIBILI REAZIONI AVERSE

Qui di seguito illustriamo alcune delle reazioni avverse che possono dipendere dall'uso di Cavex Bite&White Ready 2 Use.

Sensibilità

Durante il trattamento alcuni pazienti possono manifestare una maggiore sensibilità dei denti al freddo, altri possono manifestare una sensibilità non specifica dei denti, delle gengive, della lingua, delle labbra o della guida. In generale, i sintomi devono scomparire alcuni giorni dopo la fine del trattamento. Il trattamento può continuare con applicazioni più brevi e meno frequenti fino a ottenere l'effetto desiderato. In caso di disagio, il trattamento deve essere interrotto.

Irritazione delle gengive

I portaimpronta che arrivano fino alla gengiva possono provocare un'irritazione da media a grave del tessuto molle.

CONSERVAZIONE

- Conservare in frigorifero (<8°C)
- Non usare il materiale dopo la data di scadenza.

SMALTIMENTO

- Smaltire il prodotto conformemente alle norme vigenti a livello locale.

*Your impression is our concern
Prodotto nei Paesi Bassi.*

La nostra attività di consulenza tecnica, svolta a voce, per iscritto oppure tramite prove od esperimenti, ha luogo sulla scorta delle nostre migliori conoscenze, deve essere considerata tuttavia quale informazione senza alcun valore vincolante, anche per quanto concerne eventuali diritti di proprietà industriali di terzi, e non esime il cliente da eseguire propri controlli dei prodotti da noi forniti allo scopo di stimarne l'idoneità o no ai procedimenti ed ai fini previsti. L'applicazione, l'utilizzo e la trasformazione dei prodotti hanno luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricadono pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Nel caso tuttavia che si esiga una responsabilità, questa sarà limitata, per tutti i danni, al valore dei prodotti da noi forniti ed impiegati dal cliente. Ovviamente noi garantiamo una qualità ineccepibile dei nostri prodotti a norma delle nostre condizioni generali di vendita e di consegna.



Instrucciones de uso

DESCRIPCIÓN

En Cavex Bite&White Ready 2 Use, el peróxido de hidrógeno actúa como un agente blanqueador. En parte, es añadido como un peróxido de carbamida para asegurar suficiente estabilidad del producto. El peróxido de carbamida se disuelve rápidamente en radicales de oxígeno y agua. Durante el proceso de blanqueamiento, los radicales libres atacan los compuestos de carbono de enlace doble, que generalmente forman el origen de la decoloración dental.

PRESENTACIÓN

■ Cavex Bite&White Ready 2 Use, 6 cubetas de blanqueamiento prellenadas en un envase al vacío.

COMPOSICIÓN

Ingredientes activos:
■ 16% Peróxido de oxígeno (en parte como peróxido de carbamida)
■ 0,2% Nitroato de sodio

INDICACIONES DE USO

Cavex Bite&White Ready 2 Use es un gel para el blanqueamiento de dientes que blanquea el color de dientes naturales. Cavex Bite&White Ready 2 Use sólo puede dispensarse con receta de un dentista. Para evitar problemas de la boca o de la salud, es recomendable tener una consulta inicial con un dentista cualificado antes de realizar cualquier procedimiento de blanqueamiento.

CONTRAINDICACIONES

En los siguientes casos se recomienda consultar a un médico:

- mujeres embarazadas o en período de lactancia;
- personas que están recibiendo tratamiento para una enfermedad grave;
- niños menores de 18 años.

PROCEDIMIENTO CLÍNICO

■ Registre el color inicial, evalúe la salud actual de los dientes y asegúrese de que

las expectativas del paciente respecto al resultado final sean realistas.

- Restauraciones provisionales o temporales de los dientes pueden decolorar durante el proceso de blanqueamiento; el composite o policarbonato, sin embargo, no es afectado. Por este motivo, los pacientes que han recibido restauraciones con composite deben ser informados de que posiblemente se deberán de reemplazar los composites existentes, puesto que solo los dientes naturales se pondrán más blancos.
- Espere dos semanas después del tratamiento de blanqueamiento más reciente en pacientes que necesitan una restauración estética o adhesiva, para permitir que el color se establezca. Todas las restauraciones deben estar intactas o correctamente selladas con los materiales temporales adecuados.

- Se recomienda el uso de pasta dentífrica para dientes sensibles, 2 semanas antes y 2 semanas después de cada tratamiento.
- Debe informar siempre al paciente sobre la sensibilidad de los dientes y encías irritadas durante el tratamiento. Las encías que entran en contacto con el agente pueden volverse rojas o blancas pero después de unos días recuperarán su color normal.
- Para evitar irritaciones del tejido blando, debe aconsejar al paciente de quitar el gel superfluo en el borde de la encía y enjuagar la boca cuidadosamente después de cada tratamiento.
- El paciente no debe comer, beber ni fumar al menos 30 minutos después de cada tratamiento.
- Indique al paciente que interrumpa el tratamiento y se ponga inmediatamente en contacto con usted si se produce un problema.
- El color final se establece aproximadamente 1 semana después de finalizar el tratamiento.

ADVERTENCIAS

- El producto contiene peróxido de hidrógeno.
- Evite el contacto con los ojos.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No utilizar para dientes extremadamente sensibles.
- No coma, beba ni fume mientras lleve las cubetas.
- Nocivo por ingestión.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de que se ingiera una gran cantidad: beba inmediatamente agua, no induzca el vómito y consulte a un médico.
- Si el gel ha entrado en contacto con los ojos: abra los párpados, enjuague el ojo por lo menos durante 15 minutos sin interrupción y consulte a un médico.
- En caso de contacto con ropa, piel o pelo: quitese la ropa manchada y enjuague la piel o el pelo bajo un chorro continuo de agua.

POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS

Los efectos secundarios que pueden producirse durante el uso de Cavex Bite&White Ready 2 Use, aunque no exclusivamente, pueden ser los siguientes:

Sensibilidad

Durante el tratamiento, algunos pacientes pueden experimentar mayor sensibilidad o frialdad en los dientes; otros pueden experimentar una sensibilidad no específica en los dientes, encías, lengua, labios o garganta. En general, los síntomas suelen desaparecer unos días después del fin del tratamiento. El tratamiento puede continuarse con aplicaciones más cortas y menos frecuentes hasta que se logre el efecto de blanqueamiento deseado. Si las molestias persisten debe interrumpirse el tratamiento.

Irritación de las encías

Las cubetas que se extienden hasta las encías pueden causar una irritación moderada o grave del tejido blando.

PRECAUCIONES DE ALMACENAMIENTO

- Guardar en el frigorífico (< 8°C).
- No utilice el material después del periodo de conservación.

ELIMINACIÓN

- Elimine el producto de conformidad con las regulaciones locales de eliminación de residuos.

Your impression is our concern

Elaborado en los Países Bajos

Nuestro asesoramiento técnico de aplicación, ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos, se realiza según nuestro leal saber y entender, pero debe considerarse sólo como iniciación sin compromiso, también por lo que respecta a posibles derechos de propiedad industrial de terceros; no exime al cliente del examen propio de los productos suministrados por nosotros con el fin de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos.

La aplicación, el empleo y la transformación de los productos se llevan a cabo fuera del alcance de nuestras posibilidades de control, siendo, por tanto, de la exclusiva responsabilidad del cliente. Si, no obstante, hubiera de considerarse alguna responsabilidad por parte nuestra, ésta se limitaría para cualquier daño y perjuicio, al valor de la mercancía suministrada por nosotros y empleada por el cliente. Se sobreentiende que garantizamos la intachable calidad de nuestros productos de conformidad con nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro.



OPIS

Vodikov peroksid služi kao sredstvo za izbeljivanje u Cavex Bite&White Ready 2 Use. Dodaje se dijelom kao karbamidni peroksid da se dobije dovoljno stabilan proizvod. Karbamidni peroksid se brzo rastvara u kisikovim radikalima i vodi. Tijekom postupka izbeljivanja slobodni radikali napadaju dvostruke uglikovne veze; koji su većinom uzrok promjeni boje zubi.

PAKIRANJE

■ Cavex Bite&White Ready 2 Use, 6 unaprijed napunjenih ukladica za izbeljivanje, vakuumski pakirano.

SASTAV

Aktivni sastojci:

- 6 % Vodikov peroksid (djelomično kao karbamidni peroksid)
- 0,2% Kalijev nitrat

INDIKACIJE ZA UPORABU

Cavex Bite&White Ready 2 Use je gel za izbeljivanje zubi, pri čemu se izbeljuje prirodna boja zubi. Cavex Bite&White Ready 2 Use se izdaje samo po nalogu stomatologa. Preporuča se pregled kod nadležnog stomatologa prije svakog tretmana izbeljivanja kako bi se izbjegli problemi u usnoj šupljini ili drugi zdravstveni problemi.

KONTRAINDIKACIJE

Preporuča se savjet liječnika u dolje navedenim slučajevima:

- kod trudnica i dojinja;
- kod osoba koji se liječe od ozbiljne bolesti;
- kod djece mlađe od 18 godina.

KLINIČKI POSTUPAK

■ Utvrđite početnu boju, pregledajte postojeće zdravstveno stanje zubi i pobrinite se da su realistična očekivanja pacijenta glede konačnog rezultata.
■ Provizorne ili privremene rekonstrukcije mogu tijekom postupka izbeljivanja promijeniti boju dok se boja kompozitnog ili polikarbonatnog materijala neće promijeniti. Zbog toga se pacijenti s kompozitnim rekonstrukcijama moraju obavijestiti da se postojeći kompoziti

moraju zamjeniti, iz razloga što će se izbijeliti samo prirodni zubi.

- Kod pacijentata kojima je potrebna estetska ili adhesivna rekonstrukcija pričekajte 2 tjedna nakon zadnjeg postupka izbeljivanja; boja se tada može stabilizirati. Sve rekonstrukcije trebaju ostati nepromjenjene ili dobro izolirane s pravilnim privremenim materijalima.
- Preporuča se uporaba zubne paste za osjetljive zube 2 tjedna prije i 2 tjedna poslije tretmana.
- Uvijek trebate upozoriti pacijenta na mogućnost osjetljivih zuba ili iritanog zubnog mesa tijekom tretmana. Zubno meso koje dolazi i dodir s sredstvom može postati crveno ili bijelo, ali će nakon par dana vratiti pribrobitnu boju.
- Savjetujte pacijenta – da izbjegnete iritaciju mekog tkiva- da višak gela na rubu zubnog mesa brzo očistiti i da ueste temeljito isperete nakon tretmana.
- Pacijent nakon svakog tretmana najmanje 30 minuta ne smije jesti, pitи or pušiti.
- Dajte istrukcije pacijentu da prestane s tretmanom i odmah stupi u kontakt s vama ukoliko dođe do nekih problema.
- Konačna boja će se postići otprilike 1 tjedan nakon završetka tretmana.

UPOZORENJA

- Sadrži vodikov peroksid.
- Izbjegavati kontakt s očima.
- Držati van dohvata djece.
- Ne upotrebljavati kod preosjetljivosti zuba.
- Tijekom nošenja po mjeri prilagođenih ukladica ne smije se jesti, pitи or pušiti.
- Opasno ukoliko se proguta.

INSTRUKCIJE ZA PRVU POMOĆ

- Ako se velika količina progruta: odmah popiti vodu, ne izazivati povraćanje i zatražiti savjet liječnika.
- Ukoliko gel dove u dodir s očima: podići očne kapke, najmanje 15 minuta uzastopice oko isprati vodom i zatražiti savjet liječnika.
- U dodir gela s odjećom, kožom ili kosom: odjeću ukloniti i kožu ili kosu isprati pod tečkom vodom.

MOGUĆI NEPOVOLJNI EFEKTI

Nepovoljni efekti koji mogu biti povezani s uporabom Cavex Bite&White Ready 2 Use su između ostalog, ali ne i isključivo:

Osjetljivost

Pojedini pacijenti mogu tijekom tretmana osjetiti povećanu osjetljivost zubi na hladnoću; drugi mogu osjetiti ne-specificnu osjetljivost u zubima, zubnom mesu, jeziku, usnamu ili u grlu. Općenito simptomi trebaju nestati par dana nakon završetka tretmana. Tretman se može nastaviti s kraćim, manje frekventnim aplikacijama dok se ne postigne željeni rezultat izbeljivanja. Ako se neugodnosti nastave, treba prekinuti tretman.

Iritacija zubnog mesa

Ukladice koje dolaze do zubnog mesa mogu prouzrokovati osrednje do ozbiljne iritacije mekog tkiva.

UPUTE ZA POHRANU

- Pohraniti u hladnjaku (<8°C).
- Ne uporabiti materijal nakon isteka roka uporabe.

ODLAGANJE

- Odlagajte proizvod sukladno lokalnim pravilima za odlaganje.

*Your impression is our concern
Proizvedeno u Nizozemskoj*

Naš tehnički savjet usmeni, pismeni ili putem pokusa dajemo u dobroj vjeri, ali bez jamstva; a to se odnosi i na slučajevе koji uključuju vlasnička prava neke treće strane. To vas ne oblađuje obvezе testiranja proizvoda koje vam isporučujem obzirom na njihovu prikladnost za područje primjene i uporabu. Primjena, uporaba i obrada proizvoda su izvan naše kontrole pa ste stoga isključivo vi odgovorni za njih. Ako se uspriosk ove odgovornosti utvrdi neka šteta ona će se ograničiti na vrijednost isporučene i korištene robe. Mi ćemo naravno osigurati stalnu kvalitetu naših proizvoda u opsegu naših Općih uvjeta prodaje i isporuke robe.



BESKRIVELSE

Brintovertite anvendes i Cavex Bite&White Ready 2 Use, som blegemiddel. Det tilsvættes delvis som carbamid peroxid for at give et tilstrækkeligt stabilt produkt. Carbamid peroxid oploses hurtigt i tilradikaler og vand. Under blegesprocessen angriber de frie radikaler de doblette kulstofforbindelser, som i de fleste tilfælde er årsagen til misfarvningen af tænderne.

PAKKEN INDEHOLDER

- Cavex Bite&White Ready 2 Use, 6 fylde blegeskinner, vakuumpakket.

SAMENSTELLING

Aktive stoffer:

- 6 % Brintovertite (dels i form af carbamid peroxid)
- 0,2 % Kaliumnitrat

ANVENDELSE

Cavex Bite&White Ready 2 Use, er en gel, der farver tænderne hvide i en proces, hvorpå den naturlige tænder bleges. Cavex Bite&White Ready 2 Use må kun udleveres på tandlægeordination. En konsultation hos en autoriseret tandlæge før hver behandling anbefales, for at udelukke at der er tale om andre mund- eller sundhedsproblemer.

KONTRAINDIKATIONER

Det anbefales at sage læge i nedenstående tilfælde:

- Gravide og ammende kvinder
- Personer, som er under behandling for en alvorlig sygdom
- Barn yngre end 18 år.

KLINISK PROCEDURE

- Find den farve, der skal være udgangspunktet, bedøm tændernes nuværende sundhedstilstand, og sørг for at patienten har realistiske forventninger til slutresultatet.
- Foreløbige eller midlertidige tandreparationer kan misfarves under blegningen. Komposit- og polykarbonatmaterialer påvirkes derimod ikke. Derfor skal patienter med

kompositreparationer informeres om, at det sundsynligt vil blive nødvendigt at udskifte disse, da kun de naturlige tænder bliver hvide.

- Vent med behandling af patienter, der har behov for æstetiske eller palimedre reparationer, til 2 uger efter sidste blegebehandling, farven har da haft tid til at stabilisere sig. Alle reparationer skal være intakte eller tilstrækkeligt forseglede med de rigtige midlertidige materialer.
- Det anbefales at tændpasta til følsomme tænder, fra 2 uger før behandlingen til 2 uger efter behandlingen.
- Advar altid patienten om at tænderne kan blive følsomme og tandkødet kan blive irriteret under behandlingen. Den del af tandkødet, der kommer i kontakt med blegemidlet, kan blive rødt eller hvidt, men efter nogle få dage får det igen sin normale farve.
- For at undgå irritation af blødt væv bør patienten rádes til at fjerne overskydende gel ved kanten af tandkødet, og at skylle munden grundigt efter behandlingen.
- Patienten skal efter hver behandling vente mindst 30 minutter med at spise, drikke og ryge.
- Giv patienten besked om at stoppe behandlingen omgående og tage kontakt med Dem, hvis der skulle opståede et problem.
- Den endelige farve dannes ca. 1 uge efter behandlingens ophør.

ADVARSLER

- Indholder brintovertite.
- Undgå kontakt med øjnene.
- Holdes udenfor børns rækkevidde.
- Må ikke bruges på overfølsomme tænder.
- Man må ikke spise, drikke og ryge, mens skinnen sidder på tænderne.
- Farligt at synke.

FØRSTEHJÆLPSINSTRUKTIONER

- Hvis man har sunket en stor mængde: druk omgående vand, prøv ikke at kaste op men kontakt læge.
- I tilfælde af, at der er kommet, gel i øjnene: løft øjenlaget og skyl øjet, uafbrudt i mindst 15 minutter, og kontakt læge.
- I tilfælde af kontakt medøj, hud eller hår: tag det angrebne øj af og skyl hud eller hår med vand under en løbende hane.

MULIGE NEGATIVE FØLGER

Negative reaktioner, som kan være følger af brugen af Cavex Bite&White Ready 2 Use, er blandt andet, men ikke udelukkende:

Følsomhed

Nogle patienter kan under behandlingen opleve øget følsomhed af tænderne overfor kulde, andre har en ikke-spesificit følsomhed i tænder, tandkød, tungt, læber og hals. Generelt skal symptomerne forsvinde på få dage efter sidste behandling. Behandlingen kan gentages med kortere eller længere intervaler, indtil det ønskede resultat er nægt. Hvis ubehaget er vedvarende, skal behandlingen afsluttes.

Irritation af tandkødet

Skinner, der når ind over tandkødet, kan være årsag til mild til alvorlig irritation af tandkødet.

OPBEVARING

- Opbevares i koleskab (< 8 °C) på et mørkt og tørt sted.
- Brug ikke materialet efter overskridelsen af holdbarhedsdatoen.

BORTSKAFFELSE

- Bortskaf produktet i henhold til de lokale regler for affald.

Your impression is our concern Fremstillet i Nederland

Vores tekniske rådgivning havde enten den er givet mundtligt, skriftligt eller ved afprøvning af produktet gives i god tro, men er uden garanti. Dette gælder også i tilfælde der involverer tredjeparts ejendomsret. Det frigør ikke brugeren for forpligtigelser til at kontrollere at det produkt vi har leveret er egnet til fremgangsmåder og anvendelsesområder som det er påtænkt anvendt til.

Da vi ikke har nogen kontrol over anvendelse, fremgangsmåde og behandling af dette produkt, sker brugen helt på brugerens ansvar. Skulle der, på trods af disse ansvarsbetingelser, opstå et rettskrav vil dette være begrænset til værdien af produkter leveret af os og anvendt af Dem. Vi vil naturligtvis levere produkter af at ensartet kvalitet inden for rammerne af vores generelle salgs- og leveringsbetingelser.



LEÍRÁS

A Cavex Bite&White Ready 2 Use termékben lévő hidrogén-peroxid fehérítő anyagokat működik. Részben karbamid-peroxid formájában adják a termékhez a megfelelő termékeinstabilitás biztosítására. A karbamid-peroxid gyorsan feloldódik karbamid, víz és oxigén-szabagyökök keletkezésére közben. A fehérítési folyamat során a szabagyökök megtámadják azokat a kettős szénvegyületeket, amelyek a fogelszíneződesekét leggyakrabban okozzák.

CSONAGOLÁS

- Cavex Bite&White Ready 2 Use, 6 előre megtöltött táca vákuumcsomagolásban.

ÖSSZETÉTEL

Hatóanyagok:

- 6% hidrogén-peroxid (részben karbamid-peroxid formájában)
- 0,2% nátrium-nitrit

HASZNÁLATI JAVALLATOK

A Cavex Bite&White Ready 2 Use a fogak fehérítésére szolgáló gél, amelynek segítségével a természetes fogak színe kifehérítik. A Cavex Bite&White Ready 2 Use kizárolag fogorvosi rendelványból adható ki. Az egészségügyi és szájorvásárlók elkerülésére bármilyen fehérítő kezelést megelőzően fogorvosi konzultáció szükséges..

ELLENJAVALLATOK

Kizárolag orvosi javaslatra használható a következő esetekben:

- terhes vagy szoptató nők;
- súlyos betegséggel kezelt személyek;
- 18 évnél alábbi gyermekek.

KLINIKAI ELJÁRÁS

- Jegyezz fel a kiindulási szint, értékelje a fogak jelenlegi egészségi állapotát, és győződjön meg arról, hogy a paciens elvárásai a végeredményt illetően teljesek.
- Az átmeneti vagy ideiglenes fogfójtások a fehérítési folyamat során elszíneződhettek, a kompozit vagy polikarbonát anyagokra azonban nincs hatással az eljárás. A

kompozit fogfójtásokkal rendelkező pácienseket tájékoztatni kell arról, lehet, hogy megleívő kompozit fogfójtásait ki kell cserélni, mivel csak a természetes fogak fehérítének ki.

- Azoknál a pácienseknél, akiknek esztétikai vagy ragasztott fogfójtásra van szükségük, várjon két hélig a legutolsó fehérítő kezelés után, hogy a szín stabilizálódhasson. minden fogfójtásnak épnek, vagy helyesen megválasztott ideiglenes anyagokkal megfelelően lezártan kell lennie.
- Vasarnapi kell az érzékeny fogakhoz való fogkrém használatát a kezelés előtt és után 2-2 héting. Mindig tájékoztassa a pácienset a következőről:
- A fogak és az irritált íny a kezelés alatt érzékenyen lesz. A hatóanyaggal érintkezésbe lépő íny vörösre vagy fehérre változhat, de néhány nap mulva visszanyeri normális színét.

- A lágyszövetek irritációjának elkerülésére tanácsolja a páciensnek, hogy törlje le a felesleges gélt az íny széléről, és alaposan öblítse ki a száját a kezelés után.
- A páciensnek kezelését után legalább 30 percig nem szabad enni, inni és dohányozni.
- Mondja meg a páciensnek, hogy ha probléma jelentkezik, hogyha abba a kezelést és azonnal forduljon Önhez.
- A végeleges szín a kezelés után körülbelül 1 héttel alakul ki.

FIGYELMEZTETÉSEK

- A termék hidrogén-peroxidot tartalmaz.
- Kerülni kell a szembe jutást.
- Gyermekek elől elszárváztartandó.
- Tülerzékeny fogakhoz nem szabad használni.
- A tálca hordozása közben nem szabad enni, inni és dohányozni.
- Lenyelve ártalmas.

ELŐSEGÍT-UTASÍTÁSOK

- Nagy mennyiséges lenyelése esetén: azonnal igyon vizet, nem alkalmazzon hánymatot, és forduljon orvoshoz.
- Ha a gél a szembe jutott: nyissa szét a szemhéjakat, legalább 15 percen át

folyamatosan öblítse a szemet vízzel, és forduljon orvoshoz.

- Ha a gél a ruházatra, a bőrre vagy a hajra jutott: vegye le az érintett ruházatot, és folyó vízzel öblítse le a bőrt vagy a hajat.

LEHETSÉGES MELLÉKHATÁSOK

A Cavex Bite&White Ready 2 Use használatakor jelentkező lehetséges mellékhatások többek között a következők:

Érzékenység

A kezelés során egyes páciensek a fogak fokozott érzékenységét vagy hidegerzéletet tapasztalhatják; mások a fogak, az iny, az ajkák és a tork általános érzékenységét érezhetik. A tüneteknek általában a kezelés után néhány nappal meg kell szűnniük. A kezelés rövidebb és kevésbé gyakori alkalmazásokkal folytatódhat, amíg el nem en a kívánt fehérítő hatást. Ha a kellemetlen érzés nem múlik el, a kezelést abba kell hagyni.

Az iny irritációja

Az inyig felnyúló tálca a lágyszövetek közepes-sűrűs irritációját okozhatják.

TÁROLÁSI UTASÍTÁSOK

- Hűtőszekrényben tárolandó (<8 °C)
- Az eltarthatósági idő lejárta után nem szabad felhasználni.

HULLADEKBA HELYEZÉS

- A terméket a helyi hulladékkezelési szabályoknak megfelelően helyezze a hulladékba.

Your impression is our concern

Gyártó ország: Hollandia

Használati tanácsainkat cégbünk részéről a legjobb jöhiszemben adjuk, akár írásban, akár szóban, akár bemutató alapján, de a garancia vállalás kizárasával. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha harmadik személy tulajdonosi jogairól van szó. Ez nem mentesíti Önéket az alól, hogy az általunk szállított termékeket a felhasználás és az alkalmazás tekintetében alkalmasság szempontjából megvizsgálják.

A termékek alkalmazására felhasználására és feldolgozására nem lehetünk befolyásolással, ennélfogva az említettek teljes mértékben az Önök felelősségi körébe tartoznak. Amennyiben ezen kötelezettség következtében bármiféle károsodás keletkezne, anyagi felelősségünk legfeljebb a szállításunk tárgyat képezi, és az Önök által felhasznált termékek értékére korlátozódik. Mi a magunk részéről természetesen termékeinkre állandó minőséget biztosítunk az Általános értékesítési és szállítási feltételeinknek megfelelően.



Instrukcja zastosowania

OPIS

Substancja wybielająca w Cavex Bite&White Ready 2 Use jest nadtlekiem wodoro. Został on częściowo dodany w postaci nadtleku karbamidu celem uzyskania produktu o odpowiedniej stabilności. Nadtlenek karbamidu szybko się rozpuszcza w wodzie i w rodnikach tlenu. Podczas procesu wybielania wolne rodniki atakują podwójne połączenia węglowe, które przeważnie są przyczyną przebarwienia użebienia.

OPAKOWANIE

- Cavex Bite&White Ready 2 Use, 6 wypełnionych wybielającym żelom, próżniowo zapakowanych aplikatorów.

SKŁAD

Aktywne składniki:

- 6 % Nadtlenek wodoro (częściowo w postaci nadtleku karbamidu)
- 0,2% Azotan potasu

WSKAZÓWKI PRZY ZASTOSOWANIU

Cavex Bite&White Ready 2 Use ma postać żelu do wybielania użebienia, przy czym wybielony jest naturalny kolor użebienia. Cavex Bite&White Ready 2 Use może zostać wydany pacjentowi wyłącznie przez dentystę. Zaleca się przeprowadzenie konsultacji u dentysty przed każdorazowym wybieleniem w celu uniknięcia problemów z jamą ustną lub problemów zdrowotnych.

PRZECIWWSKAZANIA

W poniższych przypadkach zaleca się skontaktowanie się z lekarzem:

- w przypadku kobiet ciężarnych i matek karmiących piersią;
- w przypadku osób leczących się na ciękie choroby;
- w przypadku osób poniżej 18 lat życia.

PROCEDURA KLINICZNA

- Ustal kolor wyścielowy, sprawdź stan zdrowia użebienia i upewnij się, że pacjent ma

realistyczne oczekiwania co do rezultatu końcowego.

- Tymczasowe wypełnienia użebienia mogą ulec przebarwieniu w trakcie procesu wybielania, przy czym kompozyt czy materiał poliwęglanowy nie ulegają zmianom. Dlatego pacjentowi z wypełnieniem kompozytowym należy wyjaśnić, że istniejące kompozyty być może będą musiały zostać wymienione, bowiem jedynie naturalne użebienie stanie się bielsze.
- W przypadku pacjentów wymagających estetycznych lub adhezyjnych wypełnień należy odzckać 2 tygodnie od ostatniego wybielania przed ich wykonaniem, gdyż tyle trwa ustabilizowanie się koloru. Wszystkie wypełnienia powinny być niemaruszone lub dobrze zamknięte właściwymi tymczasowymi materiałami.
- Zaleca się stosowanie pasty do zębów wrażliwych w ciągu 2 tygodni przed i 2 tygodni po wybieleniu.
- Pacjenta zawsze należy poinformować odróżnienie wrażliwości użebienia i podrażnienia dziąseł w trakcie zabiegów. Działa, które weszy w kontakt ze środkiem, mogą ulec zaczernieniu lub odbarwieniu, ale po kilku dniach ich normalny kolor powróci.
- Celem uniknięcia podrażnienia miękkiej tkanki należy pacjentowi zalecić usunięcie nadmiernego ilości żelu z granicy dziąseł, a jamę ustną należy dobrze przepłukać po zabiegu.
- Po zabiegu pacjentowi nie wolno nic jeść, ani pić ani palić przez przynajmniej 30 minut.
- Należy poinstruować pacjenta, aby przerwał zabieg lub natychmiast skontaktował się z dentystą, w razie wystąpienia komplikacji.
- Ostateczny kolor ustala się po około 1 tygodniu od zakończenia zabiegu.

OSTRZEŻENIA

- Zawiera nadtlenek wodoro.
- Należy unikać kontaktu z oczami.
- Trzymać poza zasięgiem dzieci.
- Nie stosować przy nadwrażliwym użebieniu.
- W trakcie wybielania nie należy jeść, pić ani palic.
- Środek niebezpieczny po polkniciu.

INSTRUKCJE W PRZYPADKU PIERWSZEJ POMOCY

- W razie polknienia dużej ilości: od razu napić się wody, nie wywoływać wymiotów i skonsultować się z lekarzem.
- Jeśli żel dosiał się do oczu: rozerwać powieki, oko splukać wodą przynajmniej przez 15 minut i skonsultować się z lekarzem.
- W razie kontaktu z odzieżą, skórą lub z włosami: zniszczyć odzież usunąć a skórę lub włosy splukać pod bieżącą wodą.

MOŻLIWE SKUTKI UBOCZNE

Mögliche Nebenwirkungen im Zusammenhang mit der Anwendung von Cavex Bite&White Ready 2 Use sind:

Wrażliwość

Niektórzy pacjenci mogą podczas zabiegu odczuwać wrażliwość użebienia na zimno; inni mogą odczuwać bliżej niesprecyzowaną wrażliwość użebienia, dziąseł, języka, warg lub gardła. Ogólnie rzecz biorąc symptomy powinny minąć kilka dni po zabiegu. Wybielenie można kontynuować skracając czas i zmniejszając częstotliwość zabiegów do momentu osiągnięcia pożądanego efektu wybielającego. Jeśli pomimo tego nadwrażliwość będzie się utrzymywać należy przerwać wybielenie.

Podrażnienia dziąseł

Aplikatory mogą spowodować średnie lub poważne podrażnienie tkanki miękkiej.

SPOSÓB PRZECHOWYWANIA

- Przechowywać w lodówce (-8°C)
- Nie stosować po upływie terminu ważności.

UTYLIZACJA

- Produkt należy zutylizować wg lokalnie obowiązujących zasad utylizacji odpadów.

Your impression is our concern
Wyprodukowano w Holandii

Informacje techniczne na temat naszego produktu sa przekazane wyłącznie w dobrej wierze, ale bez gwarancji i to stosuje się również w momencie gdzie własność praw osób trzecich wchodzi w gry. Nie zwalnia to jednak z obowiązku zbadania przez Ciebie materiałów przez nas dostarczonych pod katem zastosowania. Ponieważ zastosowanie w/w materiałów oraz jego użycie odbywa się poza naszą kontrolą, nie ponosimy z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.



Instruções de utilização

CAVEX

Bite&White READY 2 USE

Descrição

O agente de Clareamento contido em Cavex Bite&White Ready 2 Use é o peróxido de hidrogénio. Este é parcialmente adicionado sob a forma de peróxido de carbamida para assegurar uma boa estabilidade do produto. O peróxido de carbamida dissolve-se rapidamente em radicais de oxigénio e em água. Durante o processo de clareamento, os radicais livres atacam as duplas ligações entre os carbonos dos pigmentos, os quais são geralmente a causa da descoloração dos dentes.

EMBALAGEM

■ Cavex Bite&White Ready 2 Use, 6 placas de clareamento pré-preenchidas embaladas à vácuo.

COMPOSIÇÃO

Componentes ativos:

- 6 % Peróxido de hidrogénio (parcialmente sob a forma de peróxido de carbamida)
- 0,2 % Nitrato de sódio

INDICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Cavex Bite&White Ready 2 Use trata-se de um gel para clareamento dos dentes que clareia a cor natural dos dentes. Cavex Bite&White Ready 2 Use apenas pode ser fornecido através de prescrição de um dentista. De forma a evitar problemas de saúde na boca e nos dentes, recomenda-se uma consulta prévia a um dentista qualificado antes de iniciar qualquer tratamento de clareamento dentário.

CONTRA-INDICAÇÕES

Recomenda-se a consulta de um médico nos seguintes casos:

- mulheres grávidas e lactantes;
- pessoas em tratamento contra uma doença grave;
- crianças e jovens com menos de 18 anos.

PROCEDIMENTO CLÍNICO

■ Registrar a cor inicial, avaliar a saúde atual da dentição e assegurar-se de que

as expectativas do paciente em relação ao resultado final são realistas.

- As restaurações provisórias ou temporárias dos dentes podem descolorar durante o processo de clareamento, mas as resinas compostas ou restaurações a base de policarbonato não são afetadas. Desta forma, os pacientes que tenham restaurações com resinas compostas devem ser informados que os compósitos existentes poderão ter de ser substituídos, uma vez que apenas os dentes naturais venham a se tornar mais claros.
- No caso de pacientes que necessitem de uma restauração estética ou adesiva, aguardar 2 semanas após o último tratamento de clareamento para permitir a estabilização da cor. Todas as restaurações devem encontrar-se intactas ou corretamente seladas com os materiais temporários adequados.

- Aconselhar a utilização de um dentífrico para dentes sensíveis, 2 semanas antes e 2 semanas depois do tratamento.
- O paciente deve ser sempre informado sobre a possibilidade de sensibilidade dos dentes ou de irritação gengival durante a realização do tratamento. A gengiva que entrar em contacto com o produto pode tornar-se vermelha ou branca, mas retornará a cor normal após alguns dias.
- Para evitar irritação dos tecidos moles, aconselhar o paciente a retirar o gel em excesso da gengiva e enxaguar a boca cuidadosamente após o tratamento.
- O paciente não deve comer, beber ou fumar durante pelo menos 30 minutos após cada tratamento.
- Solicitar ao paciente que pare o tratamento e que o contate de imediato em caso de qualquer problema.
- A cor final surge cerca de 1 semana após a finalização do tratamento.

ADVERTÊNCIAS

- Contém peróxido de hidrogénio.
- Evitar o contacto com os olhos.
- Manter fora do alcance das crianças.
- Não utilizar sobre dentes hipersensíveis.
- Não comer, beber ou fumar durante a utilização das placas.
- Perigo em caso de ingestão.

INSTRUÇÕES DE PRIMEIROS SOCORROS

- Se tiver sido ingerido grande quantidade de produto: beber água de imediato, não provocar o vomito e consultar um médico.
- Em caso de contacto do gel com os olhos: enxaguar bem os olhos com água durante pelo menos 15 minutos sem interrupção mantendo as pálpebras bem abertas; consultar um médico.
- Em caso de contacto com vestuário, pele ou com os cabelos: remover a roupa afetada e enxaguar a pele ou os cabelos com água corrente.

POSSÍVEIS EFEITOS INDESEJÁVEIS

A utilização de Cavex Bite&White Ready 2 Use pode provocar os seguintes efeitos indesejáveis (lista não exaustiva):

Sensibilidade

Durante o tratamento, alguns pacientes podem sentir maior sensibilidade nos dentes em relação ao frio; outros podem sentir uma sensibilidade não específica dos dentes, gengivas, língua, lábios ou garganta. Em geral, os sintomas devem desaparecer depois de alguns dias após o tratamento. O tratamento pode ser continuado com aplicações menos frequentes até que o efeito de clareamento desejado tenha sido atingido. Se o desconforto persistir, o tratamento deve ser terminado.

Irritação da gengiva

As placas que se estendem até a gengiva podem provocar uma irritação de moderada a forte nos tecidos moles.

CONSELHO DE CONSERVAÇÃO

- Conservar sob refrigeração (< 8 °C)
- Não utilizar o produto após o seu prazo de validade.

ELIMINAÇÃO

- Eliminar o produto de acordo com a regulamentação local sobre a eliminação de lixos.

Your impression is our concern

Fabricado nos Países Baixos

As nossas recomendações relativas à aplicação técnica oral, por escrito ou por meio de ensaios são, segundo os nossos critérios, de confiança, no entanto apenas são válidas instruções/ indicações sem compromisso, igualmente com respeito a eventuais direitos de protecção de terceiros. Eles não o libertam da obrigação de controlar os produtos que nós lhe fornecemos relativamente à sua respectiva capacidade face aos processos e objectivos em questão. A aplicação, a utilização e a elaboração dos produtos tem lugar fora do nosso campo de controle. Elas são por isso de sua responsabilidade. Em caso de dano, esta última limita-se ao valor dos bens que nós fornecemos e que foram utilizados por si. Naturalmente que garantimos a boa qualidade dos nossos produtos, em conformidade com os critérios mencionados relativos às nossas condições gerais de venda e de fornecimento.



BESKRIVNING

Blekmediet i Cavex Bite&White Ready 2 Use är vätesuperoxid. Det tillfogas delvis som karbamidperoxid för att få en tillräckligt stabil produkt. Karbamidperoxiden löses snabbt upp i syreradikaler och vatten. Under blekningsprocessen angriper de fria radikalerna de dubbla koföreningarna, som oftast är källan till missfärgade tänder.

FDÖRPACKNING

- Cavex Bite&White Ready 2 Use, 6 förfyllda blekningsskenor i en vacuumförpackning.

SAMMANSTÄLLNING

Aktiva beständsdelar:

- 6 % Vätesuperoxid (dels som karbamidperoxid)
- 0,2 % Kaliumnitrat

INDIKATIONER FÖR ANVÄNDNING

Cavex Bite&White Ready 2 Use är en gel som ger vita tänder, genom att bleka de naturliga tändernas färg. Cavex Bite&White Ready 2 Use får endast tillhandahållas av tandläkare. Vi rekommenderar ett besök hos en legitimerad tandläkare före varje blekning, för att undvika problem med (mun)hälsan.

KONTRAINDIKATIONER

Vi rekommenderar följande grupper att kontakta läkare innan produkten används:

- gravida och ammande kvinnor
- personer som behandlas för en allvarlig sjukdom
- barn under 18 år.

KLINISKT FÖRFARANDE

- Registrera den ursprungliga färgen, bedöm tändernas status och kontrollera att patienten har realistiska förväntningar på slutresultatet.
- Provisoriska fyllningar kan missfärgas under blekningen, medan komposit- eller polykarbonatmaterial inte påverkas. Därför ska alla patienter med kompositfyllningar informeras om att befintlig komposit kanske

måste bytas ut, eftersom det endast är naturliga tänder som blir vita.

- Vänstra med behandlingen av patienter som behöver en estetisk eller håftande lagnings i två veckor efter blekningen, då hinner färger stabilisera sig. Alla lagningsar ska vara intakta, eller väl försedda med provisoriska material.
- Vi rekommenderar att tänderna borstas med tandkräm för känsliga tänder under 2 veckor före behandlingen och två veckor efteråt.
- Upplyt alltid patienten om att tänderna kan bli känsliga och att tandköttet kan bli irriterat under behandlingen. Den del av tandköttet som kommer i kontakt med materialet kan bli rött eller vitt, men efter ett par dagar återgår det till sin normala färg.
- Rekommendera patienten att borsta bort överflödig gel vid tandkötsgränsen - för att förebygga irritationer på mjukvävnaderna - och att skölja munnen noga efter behandlingen.
- Under minst 30 minuter efter varje behandling får patienten inte åta, dricka eller röka.
- Instruera patienten om att avbryta behandlingen och omedelbart kontakta dig om det skulle uppstå några problem.
- Den verkliga färgen visas ungefär en vecka efter att behandlingen har avslutats.

ALLMÄN INFORMATION

- Innehåller vätesuperoxid.
- Undvik kontakt med ögonen.
- Forvaras utom räckhåll för barn.
- Använd inte på överkänsliga tänder.
- Åt, drick eller rök inte när du har skenorna inne.
- Farligt att svälja.

INSTRUKTIONER FÖR FÖRSTA HJÄLPEN

- Om du svalt en större mängd: drick genast vatten, tvinga ihop fram kräkningar och kontakta läkare.
- Om det kommit gel i ögonen ska du dra upp ögonlocken, skölja ögat med vatten i minst 15 minuter och kontakta läkare.
- Om gel kommer på kläderna, huden eller i håret: ta av kläderna och skölj huden eller håret under rinnande vatten.

MÖJLIGA BIVERKNINGAR

Biverknningar som kan uppstå i samband med användning av Cavex Bite&White Ready 2 Use är bland annat, men inte enbart:

Känslighet

Vissa patienter upplever under behandlingen att tänderna blir känsligare för kyla, andra kan känna av en icke-spesific känslighet i tänder, tandkött, tunga, läppar eller hals. I allmänhet ska symptomet försvinna ett par dagar efter att behandlingen har avslutats. Behandlingen kan fortsättas med kortare, mindre frekventa användningar tills du har erhållit önskad blekningsgrad. Om obehagen kvarstår ska behandlingen avslutas.

Iritator tandkött

Skenor som sträcker sig över tandköttet kan ge en mättig till allvarlig irritation av mjukvävnad.

FÖRVARINGSREKOMMENDATION

- Förvaras i kylskåp (< 8°C)
- Använd inte materialet efter det angivna båst före-datumet.

KASSERING

- Kassera produkten i enlighet med lokala avfallsregler.

Your impression is our concern

Tillverkat i Nederländerna

Vårt tekniska råd, antingen verbalt, skriftligt eller grundat på erfarenhet, har getts i god tro men utan garantier. Detta gäller också där äganderättsförhållanden för tredje part blir aktuella. Det befrir ej er från skyldigheten att testa produkter som tillhandahålls av oss avseende deras lämplighet för avsedda behandlingar och indikationer.

Applikationen, användningen och hanteringen av produkterna ligger utanför vår kontroll och är helt och hället ert ansvar. Skulle vi trots detta hållas ansvars skyldiga begränsas svarset till värdet av det gods som levereras av oss och använts av er. Vi garanterar, naturligtvis, en jämn kvalitet på våra produkter inom ramarna för gällande leveransbestämmelser.



TANIM

Cavex Bite&White Ready 2 Use'nin içinde beyazlatma maddesi olarak hidrojen peroksit kullanılmaktadır. Ürün dengesini yeterince sağlamak üzere, içine kısmen karbamit peroksit de eklenmiştir. Karbamit peroksit, hemen okşijen radikalleri ve su olarak ayrılır. Beyazlatma süreci sırasında serbest radikaller çift karbon bilesiklerini yok eder. Bunlar genellikle diş renginin değişmesine neden olur.

AMBALAJ

- Cavex Bite&White Ready-2-Use, vakum ambalajlı 6 adet hazır kartuş, beyazlatma kalıbı.

TERKİP (FORMÜLÜ)

Etkin bilesenler:

- % 6 Hidrojen peroksit (kismen karbamit peroksit şeklinde)
- % 0,2 Potasyum nitrat

KULLANIM İÇİN ENDİKASYONLAR (ENDİKASYONLARI)

Cavex Bite&White Ready 2 Use dişleri beyazlatmak için bir jelirdir, bununla dişlerin doğal rengi beyazlaşır. Cavex Bite&White Ready 2 Use ancak bir diş doktorunun talimatıyla tedarik edilebilir. Her beyazlatma seansından önce yetkililer bir diş doktoru tarafından muayene yapılmış ağız ve sağlık sorunlarına engel olmak için tavyise edilir.

KONTRA ENDİKASYONLAR

Aşağıdaki hallerde bir doktora başvurulması tavyise edilir.

- Hamile kadınlarında ve çocuk emziren kadınlarında,
- Ciddi bir hastalık için tedavi edilen kişilerde,
- 18 yaşından küçük çocuklarına

KLİNİK PROSEDÜRLER

- Başlangıçtaki rengi tespit ediniz, dişlerin şimdiki sağlamlığını değerlendiriniz ve hastanın kesin sonucu hakkındaki bekleyenlerin gerçekçi olmasına sağlayınız.
- Bileşim veya polikarbonat malzemelerine etki yapmamakla birlikte provizyonel veya geçici diş restorasyonları beyazlatma süreci

sırasında renk değiştirebilir. Bu nedenle alaşımı restorasyonlara sahip hastalarla, mewcut alaşımın belki de değiştirilmesi gerekliği konusunda bilgi verilmeli, aksi takdirde sadece doğal dişler beyazlar.

- Estetik veya adezif onarım gerektiren Estetik veya adezi restorasyon gerektiren hastalarla son beyazlatma seansından sonrasında iki hafta kadar bekleyiniz; renk bu arada sabit hal alabilir. Tüm restorasyon tam veya doğru geçici malzemelerle sağlanca sizdirmaz hale getirilmeli olacaktır.
- Hastanın tedaviden 2 hafta öncesinden 2 hafta sonrasında kadar hassas dişlerin yönelik diş macunu kullanımı tavyise edilir.
- Tedavi sırasında, dişlerin duyarlılığı veya diş etinin tahrîsi konusunda hastayı her zaman, uyarınç. Maddâye teman halinde olan diş eti kırmızı veya beyaz olabilir, ancak birkaç günden sonra tekrar normal rengini alır.
- Hastaya - yumuşak dokunun tahrîs edilmesini önlemek açısından - diş eti sınırlarındaki fazlalık jel silmesini ve tedaviden sonra ağızını iyice duralamasına tavyise ediniz.
- Hastâ her tedaviden sonra en az 30 dakika bir süre yemeyecek, sıvı ve sigara içmeyecektir.
- Bir sorun oluştuğunda tedaviye son vermesi ve hemen sizinle irtibat geçmesi konusunda hastaya talimat veriniz.
- Beyazlık neticesini tedavi bitiminden yaklaşık bir hafta sonra elde etmiş olacaksınız.

UYARILAR

- Hidrojen peroksit içerir.
- Gözlerle temasın kaçınınız.
- Çocukların ulaşamadığı yerde saklayınız.
- Aşırı hassas dişlerde kullanmayın.
- Plak ağızınızda olduğu sürede bir şey yemezsiniz, sıvı veya sigara içmemeyiniz.
- Yutulması tehlikelidir.

İLK YARDIM TALİMİ

- Büyüük bir kısmı yutulduğunda: hemen su içiniz, kusmayın ve doktora başvurunuz.
- Gözlerle jel girdiğinde: göz kapaklarınıza açık tutunuz ve gözlerinizi en az 15 dakika

arasılıksız olarak suyla durulayınız ve doktora başvurunuz.

- Kıyafetinize, cilde veya saça dokunduğunda: kirli kıyafetleri çıkartın ve cildi veya saça akan musluğın altında durulayınız.

OLASI ZARARLI ETKİLER

Cavex Bite&White Ready 2 Use kullanımıyla ilgili olabilecek zararlı etkiler örneğin şunlardır fakat bununa sınırlı değildir:

Hassasiyet

Bazı hastalar tedavi sırasında dişlerin soğuga karşı daha duyarlı olmasını hissedebilir, diğerleri ise diş, diş eti, dil, diş, diş veya boğazda belirgin olmayan bir hassasiyet hissedebilirler. Genel olarak, belirtiler tedavinin sona ermesinden birkaç gün sonra kaybolur. İstenilen ağartmanın (beyazlatmanın) etkisine ulaşılincaya kadar, tedaviye dahil kısa ve daha aralıklı uygulamalarla devam edilebilir. Rahatsızlık devam ederse tedaviye son verilecektir.

Diş etinin tahrîs olması

Diş etine kadar gelen ölçü kaşıkları yumuşak dokuda orta dereceden ciddi derecede kadar tahrîse neden olabilir.

SAKLAMA TAVSİYESİ

- Büzdolabında saklayın (% <8°C)
- Son kullanım tarihinden sonra malzemeyi kullanmayın.

İMHA

- Ürünü yerel ototillerin atık kurallarına uygun olarak yok ediniz.

*Your impression is our concern
Hollanda'da üretilmiştir.*

Sözlü, yazılı veya denemelerle verdığımız teknik tavsiyeler güvenle ancak garanti verilmeden yapılmıştır, ve bu aynı zamanda üçüncü kişilerin mal sahipliği haklarını da kapsar. Bu sizi belirtilen prosesler ve kullanımlar için tarafımızdan sağlanan ürünlerin test etmek zorunluluğundan uzaklaşırız.

Ürünlerin uygulanması, kullanım ve prosesleri bizim kontrolümüzün ötesindedir ve bu yüzden tamamen sizin sorumluluğundur. Bu sorumluluğu rağmen belirtilen herhangi bir zarar bizim tarafımızdan verilen ve sizin tarafınızdan kullanılan malların değerlerileyi limiti olacak. Tabii ki, ürünlerinizin uygun kalitesini Genel Satış ve Dağıtım Koşullarınızın içinde sağlayacağınız.



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το υπεροξείδιο υδρογόνου λειτουργεί ως λευκαντικό πάραγοντας στα Cavex Bite&White Ready 2 Use. Προστίθεται εν μέρει ως υπεροξείδιο καρβαμίδιου προκειμένου να επιπερφέται ένα επαρκώς σταθερό προϊόν. Το υπεροξείδιο καρβαμίδιου διασπάται γρήγορα σε ρίζες ογκούνος και νερό. Η διάρκεια της διαδικασίας λεύκανσης, οι ελεύθερες ρίζες προσβάλλουν τις διπλανθρακικές ενώσεις, στις οποίες οφελετά συνήθως ο αποχρωματισμός των δοντιών.

ΣΥΚΕΥΑΣΙΑ

- Cavex Bite&White Ready 2 Use, 6 προγευμένα δισκάρια λεύκανσης σε αεροστήγη συσκευασία.

ΣΥΝΘΕΣΗ

Ενέργα συστατικά:

- 6 % Υπεροξείδιο υδρογόνου (en μέρει ως υπεροξείδιο καρβαμίδιου)
- 0,2% Νιτρικό κάλιο

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

Το Cavex Bite&White Ready 2 Use είναι ένα λευκαντικό τζελ δοντιών, που χρησιμοποιείται για τη λεύκανση φυσικών δοντιών. Το Cavex Bite&White Ready 2 Use χρηγείται μόνο με συνταγή οδοντιάτρου. Για να αποφύγετε στοματικές προβλημάτια ή προβλήματα υγείας, συνιστάται να συμβουλεύεστε πριν από κάθε θεραπεία λεύκανσης ένα διπλωματούχο οδοντίατρο.

ΑΝΤΕΝΑΞΕΙΣ

Τα παρακάτω άτομα συνιστάται να συμβουλεύονται ένα γιατρό:

- Έγκυες και θηλαστικές γυναίκες
- άτομα που υποβάλλονται σε θεραπεία για σοβαρή ασθέτια
- παιδιά κάτω των 18 ετών.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

- Καθορίστε το χρώμα εκκίνησης, εκτιμήστε την κατάσταση υγείας της δούνοντοστοιχίας και

φροντίστε να είναι ρεαλιστικές οι προσδοκίες του ασθενούς για το τελικό αποτέλεσμα.

- Πρόχειρες ή προσωρινές αποκαταστάσεις οδοντοστοιχίας μπορούν να αποχρωματιστούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας λεύκανσης, ενώ σύνθετο ή πολυωαθρακικό υλικό δεν επηρεάζεται. Γι' αυτό πρέπει να ενημερώνονται οι ασθενείς που έχουν σύνθετες αποκαταστάσεις ότι τα υψηλάτανα σύνθετα υλικά ενδέχεται να πρέπει να αντικατασταθούν, δεδομένου ότι μόνο τα φυσικά δόντια γίνονται λευκότερα.
- Σε περίπτωση ασθενών που χρειάζονται μια αισθητική ή συγκαλπική αποκαταστάση, πρέπει να περιμένετε 2 εβδομάδες μετά την τελευταία θεραπεία λεύκανσης το χρώμα μπορεί τότε να σταθεροποιηθεί. Ελάσσονες αποκαταστάσεις πρέπει να είναι ακέραιες, ή καλά συγραμμένες με τα σωστά προσωρινά υλικά.
- Πρέπει να συνιστάται τη χρήση οδοντόπαστας για ευαισθάθια δόντια, 2 εβδομάδες πριν από τη θεραπεία μέχρι 2 εβδομάδες μετά τη θεραπεία.
- Πρέπει να προειδοποιείτε πάντα τον ασθενή για ευαισθάθια των δοντιών η έρεθισμα των ούλων κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Τα ούλα που έχονται σε εταφή με το υλικό μπορούν να κακιστήσουν ή να ασπρίσουν, αλλά ύστερα από μερικές ημέρες ανακτούν το φυσιολογικό χρώμα.
- Συμβουλέψτε τον ασθενή – προς πρόληψη έρεθισμού του μαλακού ιστού – να σκουπίζει το τζελ που περιστένει στη γραμμή των ούλων και να ζετάνει πολύ καλά το στόμα του μετά τη διαδικασία.
- Ο ασθενής δεν επιτρέπεται να τρώει, να πίνει ή να καπνίζει επί 30 λεπτά τουλάχιστον μετά από κάθε διαδικασία.
- Πίετε στον ασθενή να σταματήσει τη θεραπεία και να έρθει αμέσως σε εταφή μαζί σας εάν παρουσιάστε κάποιο πρόβλημα.
- Το τελικό χρώμα επιτυγχάνεται 1 βδομάδα περίπου μετά την περάσωση της θεραπείας.

ΠΡΟΙΔΑΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Περιέχει υπεροξείδιο υδρογόνου.
- Μη παραφένετε επαφή με τα μάτια.
- Να το κρατάτε μακριά από τα παιδιά.
- Μη το χρησιμοποιείτε σε υπερευαίσθητα δόντια.
- Μη τρώει, μη πίνετε και μη καπνίζετε ενόσω φοράτε τα δισκάρια.
- Επικινδύνου σε περίπτωση κατάποσης.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

- Αν καταπίπτει μια μεγάλη ποσότητα: πιείτε αρέσκεις νερό, μη προκαλέστε εμέτο και σιμβούλουσθείτε ένα γιατρό.
- Αν πάει τζελ στα μάτια: κρατήστε ανοιχτά τα βλέφαρα, ζετάνετε τα μάτια με νερό επί 15 λεπτά τουλάχιστον χωρίς διακοπή και σιμβούλουσθείτε ένα γιατρό.
- Σε περίπτωση εταφής με ρούχα, δέρμα ή μαλλιά: αφαιρέστε τα προσεβλημένα ρούχα και ζετάνετε το δέρμα ή τα μαλλιά με τρεχούμενο νερό.

ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Παρενέργειες που μπορούν να συνδέονται με τη χρήση του Cavex Bite&White Ready 2 Use είναι μεταξύ άλλων, κατά τρόπο όχι περιοριστικό, οι ακόλουθες:

Ευαισθησία

Ορισμένοι ασθενείς ενδέχεται να έχουν κατά τη διάρκεια της θεραπείας μια αυξημένη ευαισθησία των δοντιών στο κρύο- άλλοι ενδέχεται να έχουν μια απρόσδιορητη ευαισθησία στη δόντια, τα ούλα, τη γλώσσα, τα κείλη ή το λαιμό. Κατά γενικό κανόνα, αυτά τα συμπτώματα πρέπει να εξαφανισθούν μερικές ημέρες μετά την περάσωση της θεραπείας. Η θεραπεία μπορεί να συνεχιστεί με συντημέτρες και λιγότερα συγκέντρων εφαρμογές ώστου να επιτευχθεί το επιθύμητο αποτέλεσμα λεύκανσης. Εάν η ενδήληξη παραμένει, πρέπει να τεθεί τέρμα στη θεραπεία.

Έρεθισμός των ούλων

Τα δισκάρια που εκτείνονται μέχρι τα ούλα μπορούν να προκαλέσουν μέτριο μέχρι σοβαρό έρεθισμό του μαλακού ιστού.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΦΥΛΑΞΗΣ

- Να το φυλάσσετε στο ψυγείο (<8°C).
- Μη χρησιμοποιείτε το υλικό μετά την ημερομηνία λήξης.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ

- Να απομακρύνετε το πριόνι σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για απορρίμματα.

Your impression is our concern

Παρασκευάζεται στην Ολλανδία

Οι τεχνικές μας συμβουλές, είτε προφορικές, γραπτές είτε μεσω δοκιμών, παρέχονται τη πλήττη χωρίς ωστόσο εγγυηση, και αυτό ισχύει επίσης για τα αποκλειστικά δικαιώματα τρίτων. Δεν αναιρούν την υποχρέωση σας για δοκιμή των προϊόντων τα οποία προμηθεύετε από εμάς, σε ό,τι αφορά την καταληλότητα τους για τις διαδικασίες και χρήσεις για τις οποίες προορίζονται.

Η εφαρμογή, χρήση και επειδεργασία των προϊόντων είναι πέραν της δικής μας δικαιοδοσίας, και κατά συνεπεία αποτελεί αποκλειστικά δική σας ευθύνη. Εάν παρόλη την ευθύνη αυτή διαπιστωθεί υπαπόπτη για τυχόν βλάβη, αυτή περιορίζεται μέχρι ποσού ίσου με την αξία των προϊόντων τα οποία προμηθευτικάτε από εμάς, και τα οποία εσείς χρησιμοποιείτε. Φυσικά προσφέρουμε σταθερή ποιότητη προϊόντων στην πλάτανα των δικών μας Γενικών Όρων Πωλήσεων και Παράδοσης.

ОПИСАНИЕ

В качестве готового для использования отбеливающего средства Cavex Bite&White Ready 2 Use содержит перекись водорода, которая добавляется отчасти в форме перекиси карбамида с целью стабилизации продукта. Перекись карбамида быстро растворяется в кислородсодержащих радикалах и воде. В процессе отбеливания свободные радикалы атакуют двойные углерод-углеродные связи; именно эти соединения являются причиной изменения цвета зубной эмали.

УПАКОВКА

- Cavex Bite&White Ready 2 Use, 6 готовых к употреблению форм (капп) для отбеливания в вакуумной упаковке.

СОСТАВ

Активные ингредиенты:

- 6 % Перекись водорода (отчасти в форме перекиси карбамида)
- 0,2% Нитрат калия

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Cavex Bite&White Ready 2 Use - это гель для отбеливания зубов, осветляющий цвет природной эмали. Cavex Bite&White Ready 2 Use может предostавляться только по рекомендации зубного врача. Во избежание нанесения вреда полости рта или здоровью, рекомендуется перед каждым применением консультироваться у зубного врача, обладающего соответствующими полномочиями.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

При применении для следующей категории лиц рекомендуется проконсультироваться с врачом:

- беременные и кормящие женщины;
- лица, состоящие на лечении в связи с серьезным заболеванием;
- дети до 18-и лет.

КЛИНИЧЕСКАЯ ПРОЦЕДУРА

- Установите исходный цвет, вынесите оценку состоянию зубов на момент

процедуры и сделайте заключение о реальных возможностях конечного результата с учетом пожеланий пациента.

- Предварительные или временные реставрационные конструкции могут изменить цвет во время отбеливания, в то время как оно не влияет на цвет композиционных или поликарбонатных материалов. По этой причине пациентов с композиционными реставрациями необходимо предупредить о том, что им, вероятно, их придется заменить ввиду того, только настоящие зубы станут светлее.
- Если пациенту требуется эстетическая реставрация или цементация, подождите 2 недели после последней процедуры отбеливания т.к. цвету необходимо время для стабилизации. Все реставрационные поверхности должны быть неповрежденными, или тщательно герметизированы при помощи соответствующих временных материалов.
- В течение 2 недель до процедуры и 2 недель после процедуры рекомендуется использование зубной пасты для чувствительных зубов.
- Вы должны всегда предупреждать пациентов, что во время процедуры может возникнуть повышенная чувствительность эмали зубов или раздражение десен. После соприкосновения со средством десны могут покраснеть или побелеть; цвет десен восстанавливается через несколько дней после процедуры.
- Чтобы избежать раздражения мягких тканей, перекондите пациенту убрать излишек геля на границе с деснами и тщательно прополоскать рот после процедуры.
- В течение 30-и минут после каждого сеанса пациент не должен есть, пить или курить.
- Советуйте пациентам прекратить обработку и немедленно обратиться к врачу в случае возникновения проблем.
- Цветовой результат будет получен через 1 неделю по завершению курса.

ПРЕДОСТЕРЖЕНИЯ

- Средство содержит перекись водорода.
- Избегайте попадания в глаза.
- Хранить в недоступном для детей месте.
- Не применять при повышенной чувствительности зубов.
- Во время использования форм (капп) не принимать пищи, не пить и не курить.
- Токсично при попадании внутрь.

ИНСТРУКЦИИ ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

- При попадании вовнутрь большого количества средства: немедленно выпить воды, не вызывать рвоты и обратиться к врачу.
- При попадании геля в глаза: широко открыть веки, прополоскать глаз в течение 15 минут непрерывно и обратиться к врачу.
- При попадании на одежду, кожу или волосы: снять одежду, на которую попало средство, и прополоскать кожу или волосы под проточной водой.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Негативные последствия, возможно связанные с использованием геля Cavex Bite&White Ready 2 Use могут в числе прочего включать:

Чувствительность

Некоторые пациенты в процессе процедур могут испытывать повышенную чувствительность зубов к холоду; другие могут испытывать неспецифическую повышенную чувствительность зубов, десен, губ или горла. Как правило, данные симптомы исчезают через несколько дней после прекращения процедур. В таком случае применение средства может быть продолжено в виде укороченных сеансов, при увеличении промежутков между ними, до достижения желаемого отбеливающего эффекта. Если неприятные ощущения при этом не прекращаются, то процедуры требуются прекратить.

Раздражение десен

Формы, соприкасающиеся с деснами, могут вызвать раздражение тканей средней или серьезной степени.

МЕТОД ХРАНЕНИЯ

- Хранить в холодильнике (<8°C)
- Не используйте материал после истечения срока годности.

УТИЛИЗАЦИЯ

- Утилизируйте продукт с учетом местных предписаний по утилизации отходов.

*Your impression is our concern
Произведено в Нидерландах*

Наши рекомендации, устные или письменные, или практические выданы честно, но без гарантии, и применимы в случаях, когда затронуты права собственности третьих сторон. Вы не освобождаетесь от обязательства проверять поставляемую нами продукцию как на пригодность для пред назначенных случаев, так и пригодность к использованию. Использование продуктов- вне нашего контроля и поэтому вся ответственность ложится на вас. В случае какого-либо ущерба возмещение ограничивается стоимостью товара поставляемого нами и использованного вами. Мы гарантируем качество нашего товара в соответствии с Общими Условиями Продаж и Поставок.

工作原理

“Cavex Bite&White Ready 2 Use”牙齒美白剂中的过氧化氢，具有美白牙齿功能。部分过氧化氢以过氧化碳酰二胺的形式被加入本品，以确保产品足够稳定。过氧化碳酰二胺能在氨基和水中很快溶解。在牙齿白过程中，游离基会攻击双碳化合物，而双碳化合物，在大多数情况下，正是牙齿褪色的根源。

包装

- “Cavex Bite&White Ready 2 Use”包括6个已填充了漂白剂的牙齿模盒，真空包装。

物料

活性成分：

- 6% 过氧化氢（部分以过氧化碳酰二胺的形式呈现）
- 0.2% 硝酸钠

适用范围

“Cavex Bite&White Ready 2 Use”牙齿美白剂是凝胶状物，用于美白牙齿，即是将自然牙齿的颜色漂白。购买本品，必须有牙科医生的处方。为了避免任何口腔或身体的健康问题，建议您，在施行牙齿美白之前，请先咨询有资格的牙科医生。

不适用范围

于下列情况者不宜使用本品，如要使用，建议您要咨询医生：

- 怀孕和哺乳的妇女
- 因严重疾病而正在接受治疗的病患
- 18岁以下的儿童

临床步骤

- 先登记牙齿进行美白前的起始颜色，评估牙齿目前的健康状况，并确认：患者所期望的最终美白结果是可以实现的。

- 暂时性假牙及临时牙齿修复体在漂白过程中可能会变颜色，然而，复合的材料或聚碳酸酯的材料却不受漂白的影响。因此，有复合材料牙齿修补物的患者需要被告知，现存的复合树脂修复体很可能（为了美观）不得不被换掉重新补缀，因为只有自然牙齿能被漂白。

- 需要进行具审美性补缀或粘着永久假牙修复体的患者，在最近一次美白治疗后，要等两个星期，让颜色稳定下来。所有的修修复体都应该是用正确的临时粘着材料进行完整的或适当的密封。

- 美白治疗之前的两个星期和之后的两个星期，应该建议患者使用敏感牙齿专用牙膏。

- 你应该总是告知患者，在美白治疗期间将会产生牙齿的敏感性和牙龈会受到刺激。接触到美白剂的牙龈可能会变红或变白，但是几天以后就会呈现正常颜色了。

- 为了避免对软组织的刺激，你应该建议患者，在施行美白后擦掉残留在牙龈边缘上的美白药剂，并彻底漱口。

- 每次施行美白疗程后至少30分钟内，患者不得进食、饮水或吸烟。
- 如有问题发生，告知患者立即停止美白治疗，并与你联系。

在漂白结束后一周左右，会实现最终的（白）颜色。

警告

- 本品含有过氧化氢
- 避免与眼睛接触。
- 在儿童可触及范围之外保存。
- 不可用于过度敏感的牙齿。
- 装戴美白牙套期间，不得进食、饮水或吸烟。
- 如果吞食，有害健康。

急救指导

- 如有大量本品被吞食：请立即饮水，请勿催吐，请咨询医生。
- 如有胶状美白剂进入眼睛：拔开眼睑，持续的用清水冲洗眼睛至少15分钟，并咨询医生。
- 如有本品接触到衣物、皮肤或毛发：脱掉被接触的衣服，在水龙头下用流动水冲洗皮肤或毛发。

可能出现的副作用

与使用“Cavex Bite&White Ready 2 Use”美白药剂或者相关，可能会出现下列或其他副作用(也不完全是会：

敏感性

在美白治疗期间，有的患者可能会感觉牙齿越来越敏感、越来越凉；而有的患者无论在牙齿、牙龈还是在舌、嘴唇或喉晚上，则不会感觉到任何异常的敏感性。

通常，这样的症状会在漂白结束几天后消失。治疗可以继续进行，而缩短美白药剂的施用时间、减少施用频率，直到达到欲想的美白效果。如果

上述症状持续存在，则应该终止美白治疗。

对牙龈的刺激

如果将漂白牙套延伸至牙龈部位，可能会导致对软组织一定程度的甚至严重的刺激。

存储建议

- 置于冰箱内(<8°C)保存
- 在所标明的产品有效保质期到期后，请勿使用

用后处理

- 使用后，按照当地的废弃物处理规定处理本品

您的美齿形象 我们挂在心上**荷兰制造**

本份文件中提及的技術性建議，不論是口頭上、書面上或者通過試驗，雖都經過確認但並非百分之百。因此您有在使用前測試我們產品的義務。

應用，用途及處理產品不是我們所能控制的，因此，這完全是由自己的責任。我們僅負責產品的損壞責任，而使用中出現的責任則要由您來承擔。當然，我們提供的產品品質保障包含銷售和運送。

**제품설명**

과산화수소수는 CAVEX Bite&White Ready 2 Use의 미백제로 사용된다. 과산화요소 형태로 첨가된 과산화수소수 일부는 제품의 안정성을 충분히 높여주는 역할을 한다. 과산화요소는 활성산소와 물에 빨리 용해된다. 미백과정이 진행되는 동안 프리라디칼은 치아 변색의 주원인인 탄소이 중결합을 공격한다.

포장

- Cavex Bite&White Ready 2 Use, 충전된 미백 트레이 6개 전공 포장.

성분

주성분:

- 6 % 과산화수소수 (일부는 과산화요소 형태)
- 0.2 % 절산나트륨

사용 전 참고사항

Cavex Bite&White Ready 2 Use는 겔 탑의 치아미백제로 자연치아를 밝게 해준다. Cavex Bite&White Ready 2 Use는 치과전문의의 지시에 따라 사용되어야 한다. 구강 또는 건강에 해가 미치는 것을 예방하기 위해 미백처치를 할 때마다 미백 사전에 담당 치과전문의와 상담하도록 한다.

금기

아래의 경우에 해당하는 경우 의사의 상담을 받도록 한다:

- 임상부 및 수유 여성;
- 심한 질병 치료를 받고 있는 사람;
- 만 18세 미만의 사람.

임상절차

- 환자의 기존 치아 색을 기록하고 환자의 치아건강 상태를 확인한 후, 최종결과에 대한 환자의 기대가 현실적인지 확인한다.

- 잠정적·일시적 수복물은 미백 과정에서 색상이 변경될 수 있지만, 합성물이나 폴리카보네이트 제재는 아무런 영향을 받지 않는다. 따라서 합성수복물을 사용하는 환자에게는 자연치아만이 미백이 가능하다는 것을 알리고 기존 합성수복물의 교체가 필요할 수도 있음을 설명한다.
- 미식적 또는 접착 수복을 필요로 하는 환자는 마지막 미백치료를 끝난 후 색상이 안정될 때까지 2주를 기다려야 한다. 모든 수복물은 외부 영향을 전혀 받지 않거나, 또는 적당한 임시제재로 봉해진 상태여야 한다.
- 치료가 시작되기 2주 전부터 치료가 끝나고 나서 2주 후까지 민감성용 치약을 사용해야 한다고 권고하도록 한다.
- 치료 기간중에는 치아가 과민해지거나 잇몸이 쉽게 자극 받을 수도 있음을 환자에게 항상 인지시키도록 한다. 미백제와 접촉하는 잇몸 부위는 적색 또는 흰색으로 변할 수 있지만, 멀万里이나 원래 색으로 되돌아간다.
- 연조직의 자극을 막기 위해, 잇몸 경계에 파다하게 물은 젤을 닦아내며 쳐치 후에는 입을 깨끗하고 완전하게 헹구어야 한다고 환자에게 주지시킨다.
- 환자는 치료 후 적어도 30분 동안은 음식 및 음료수 섭취를 삼가하며, 흡연도 삼가해야 한다.
- 문제 발생시에는 즉시 치료를 중단하고 귀 치과의의 상담을 받아야 함을 환자에게 주지시킨다.
- 궁극적 색상은 쳐치 종료 후 1주일 정도가 지나면 얻어진다.

경고

- 본 제품은 과산화수소를 함유한다.
- 눈과의 접촉을 삼가한다.
- 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 매우 민감한 치아에는 사용하지 않는다.
- 트레이를 착용하고 있는 동안에는 음식 및 음료수 섭취 및 혼연을 삼가한다.
- 건강에 해로우므로 삼키지 않는다.

옹급처치법

- 대량의 제제를 삼킨 경우: 즉시 물을 마신 후 억지로 토해내려고 하지 말고 속히 의사와 상담하도록 한다.
- 둔 안에 젤이 들어간 경우: 손으로 젤기를 벌려 흐르는 물에 적어도 15분 이상 계속 씻어낸 후 의사와 상담하도록 한다.
- 의복이나 피부 또는 머리카락에 묻은 경우: 손상된 의복은 제거하고 피부나 머리카락은 흐르는 물에 깨끗이 씻어낸다.

발생 가능한 부작용

Cavex Bite&White Ready 2 Use를 사용하면 다음과 같은 증세 등이 나타날 수 있다:

파민증상

치료 중 치아가 유독 차가운 것에 파민반응을 보인다고 하는 환자들이 있는가 하면, 치아, 잇몸, 혀, 입술 또는 식도가 예민 반응을 보인다고 하는 환자들도 있다. 일반적으로 파민 증세는 치료 종료 후 며칠이 지나고나면 사라져야 한다. 치료는 원하는 미백효과가 달성될 때까지 그 기간과 빈도를 조절할 수 있다. 하지만 불편한 증세가 지속될 경우, 치료를 중단하도록 한다.

잇몸 자극

잇몸까지 연결된 트레이에는 연조직을 다소 또는 심하게 자극할 수 있다.

보관방법

- 냉장고(<8°C)에 보관하도록 한다.
- 유효기간이 경과한 제품은 사용을 삼가한다.

폐기방식

- 현지의 폐기 관련 법규에 따라 폐기하도록 한다.

*Your impression is our concern
Made in The Netherlands*

당사의 기술적 조언은, 구두로 한 것이든 서면으로 한 것이든, 또는 시험적인 것이라든 관계없이, 선의의 의도로 제공된 것으로 보증에는 해당되지 않습니다. 이는 또한 소유권이 제삼자에게 귀속된 경우에도 해당됩니다. 당사의 제품이 목적하는 사용 용도에 적합한지를 시험할 의무는 귀하께 있습니다. 제품을 적용, 사용 또는 취급하는 데 있어서의 책임은 당사의 관할영역을 벗어나므로, 이후 사용에 따른 책임은 귀하께 전적으로 있습니다. 이러한 전제조건에도 불구하고 손해가 발생할 경우, 당사의 책임은 당사가 제공한 제품 중 귀하가 사용한 제품의 값에 국한됩니다. 당사가 공급하는 제품은 당사의 <판매 및 납품에 대한 일반 약관>을 준수하는 일정한 품질을 유지할 것입니다.

**الوصف**

يُعمل بirokossid الهيدروجين كعامل تبييض في كافيكس بait آند وايت الجاهز للاستخدام، وقد ثبت أضافته جزيئياً على شكل بirokossid كارباميد لضمان ما يكفي من النبات للنتائج. بirokossid كارباميد يذوب بسرعة في شوارع الكشخن الحرة (الجذور الحرة) والماء، وأثناء عملية التبييض تقوم الجذور الحرة بمحاجة مرکبات الكهروز، لأن مركبات الكهروز ذات الارتبطة المزدوجة، التي هي في معظم الأحوال مصدر تغبر لون الأسنان.

التعينة

كافيكس بait آند وايت الجاهز للاستخدام معيناً سلقاً في 6 صيبيات تبييض داخل عبة مفرغة من الهواء.

المكونات

- 6% بirokossid الهيدروجين (جزئياً على شكل بirokossid كارباميد)
- 0.2% نترات الصوديوم

تعليمات الاستعمال

كافيكس بait آند وايت الجاهز للاستخدام هو مادة هلامية لتبييض الأسنان تعمل على تبييض لون الأسنان الطبيعية، ولا يجوز تقطيم كافيكس بait آند وايت الجاهز للاستخدام إلا بوصفة طبية من طبيب الأسنان، وتتجنب أي مشاكل صحية أو مشاكل في شفط المسبحين استشارة طبيب أسنان مؤهل قبل أي علاج للتبييض.

مقدادات الاستيطاب

من المستحسن استشارة الطبيب في الحالات التالية:
 • النساء الحوامل والمرضعات:
 • الأشخاص الخاضعون للعلاج من مرض خطير:
 • الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً.

الإجراءات السريرية

سجل لون البداية، وقيم صحة الأسنان الحالية للتأكد من أن توقعات الطبيب تجاه النتيجة النهائية هي توقعات واقعية. من الممكن أن يتغير لون الترميمات المفقأة أو الطارئة لأسنان أثناء عملية التبييض، ولكن لا تزداد ملامة الكهروز أو البولي كربونات، ولذلك يجب إبلاغ المرضى الذين لديهم ترميمات الكهروز أنه قد يكون من الضروري استبدال الكهروز، لأن الكهروز ذات الطبيعة المفتوحة قلل في حالة المرضي الذين يتضمنون

تحذيرات

- يحتوي المعلق على بirokossid الهيدروجين.
- تجنب ملامسة العينين.
- يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.
- لا يستخدم لأسنان الحساسة للغاية.
- لا تأكل ولا تشرب أو تدخن عندما تكون الصوانى مركرة.
- ضار عند بلعه.

تعليمات الإسعافات الأولية

- في حالة ابتلاء كهريكيه كبيرة، أشرب ماء على الفور.
- لا تتحمّل التقييد، واستثثير الطبيب.
- إذا أتى المعلم في العين: ارفع العين لفتح العين، واشطيف العين بالماء لمدة 15 دقيقة على الأقل بدون انقطاع واستثثير الطبيب.
- في حالة ملامسة الجلد والشعر أو الملابس، اقطع الملابس التي تأثرت واسحبها بالحكام باستخدام المواد المفقأة الصالحة.
- ينصح باستخدام معجون الأسنان الخاص للأسنان الحساسة لمدة أسبوعين قبل العلاج ولدة أسبوعين بعد العلاج.

الأثار الجانبية المحتملة

- قد تكون الآثار الجانبية التي ترتبط باستخدام كافيكس بait آند وايت الجاهز للأستخدام على التحوّل التالي، ولكن ليس حصر:

الحساسية

من الممكن أن يشعر بعض المرضى أثناء فترة العلاج بزيادة حساسية الأسنان للبرودة، ومن الممكن أن يعاني البعض الآخر من حساسية غير محددة في الأسنان أو اللثة، أو اللسان، أو الشفتين أو الحلق. بشكل عام يجب أن تختفي الأعراض بعد انتهاء العلاج ببضعة أيام، ويحظر أن تستمر العلاجة من خلال تطبيقات أقصر وأقل تكراراً حتى تتحقق نتيجة التبييض المرغوبة.

وفي حالة استمرار الإزعاج والشكوى يجب إنهاء العلاج.

تهيئ اللثة
قد يسبب الصوانى التي تمتد حتى اللثة تهيئاً معتدلاً إلى شديد للأنسجة اللينة.

نصيحة الحفظ

- يحفظ في الثلاجة (<8°).
- لا يستخدم المادة بعد انقضاء تاريخ صلاحيتها.

التخلص
تخلص من المنتج بما يتمشى مع مع اللوائح والقواعد المحلية الخاصة بالتخلص من النفايات.

طبعتك هي شاغلنا
إنجاز هولندا

ونسوك الاشارة هنا الى أن الرأي الفني الخاص بالشركة سواء كان شفيفياً أو خطيراً أو عن طريق التجارب هو رأي دون الالتزام بأى ضمان تجاه أي فرد أو أفراد يتعاملون مع مثل هذه الأصناف ولا ينبع ذلك من أن يقوم كل من نعمون بتزويد بهذه الأصناف بتجربيتها أو إجراء أي تجربة عليها.

ويحيط أن هذه التجارب خارج نطاق سلطتها وأشرفتها فـالاختبارات والتجارب هي مسؤولية هولاء الذين يتعاملون مع هذه الأصناف. ونحن وضمن مسؤوليتنا المحددة تجاه هذه الأصناف وحسب ماجاء سالفاً على أتم الاستعداد لتعويض المستهلك بقيمة الأصناف فقط التي استلمت واستخدمت من هولاء التعاملون معها وضمن وبالتالي الجودة المستمرة لجميع أصنافنا ضمن ما جاء في البنود العامة للبيع والتوريد الخاصة بشركتنا.

Cavex Holland BV
Fustweg 5
2031 CJ Haarlem
The Netherlands
www.cavex.nl

