



Cavex Holland BV
 P.O. Box 852
 2003 RW Haarlem
 The Netherlands

T +31 23 530 77 00
 F +31 23 535 64 82
 dental@cavex.nl
 www.cavex.nl

Protocol Cavex VacuFormer


Instructions for use



1 Rotate the heating element round to the back, raise the frame all the way to the top using the 2 black handles and then open the frame.



2 Set the timer at ± 10 minutes and set the switch to HEATING (-). The HEATING lamp will now light up. Allow the appliance to preheat ± 2 minutes. The heating element must be red-hot.

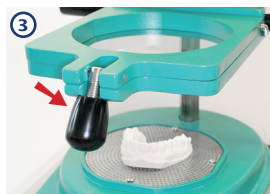

3 Place the laminate in the frame. Close the frame and firmly turn the black knob. Place the plaster mould, preferably trimmed in the shape of a horseshoe, in the centre of the vacuum plate.



4 Rotate the preheated (visibly red-hot) heating element round to the front over the frame.




5 The laminate will now heat up and slowly begin to sag.



6 When the laminate has sagged approx. 3 cm, press the switch to the VACUUM (=) position and push the frame downwards in one swift movement.



7 Rotate the heating element round to the back and allow the vacuum motor to continue running for about 40 seconds. After switching off the vacuum motor wait a further 2 to 5 min. before opening the frame.

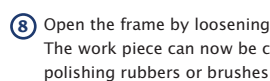

8 Open the frame by loosening the black knob at the front. The work piece can now be cut out and then finished with polishing rubbers or brushes, as desired.

Specific instructions

General

- The frame should only be moved up or down by placing both hands on the black handles
- Visit www.vacuformer.eu and click on Available Information for the FAQs (Frequently Asked Questions) and the appropriate answers

Mouth guard

!! Attention. Do not preheat for this indication !!

- Heat up slowly immediately above the frame with the mouth guard laminate (use an appliance that has cooled down)
- The mouth guard should be cut back to the middle of the 1st molar for more comfort when wearing
- Use a gas burner with a blue flame to give the edges a nice shine

More tips on www.vacuformer.eu



Splint

- Remove the blue foil (2 sides)
- Store in a cool, dry place; the material is slightly hygroscopic
- Before removing the splint from the plaster mould, remove as much excess material as possible in connection with hardening

More tips on www.vacuformer.eu



Bruxism and Splint X-heavy

- Remove the blue foil (2 sides)
- Store in a cool, dry place; the material is slightly hygroscopic
- Cut out with e.g. a small grinding disc

More tips on www.vacuformer.eu



Bleach

- For maximum comfort and to prevent the bleaching gel from prolonged contact with the gingiva, cut out along the edge of the gingiva

More tips on www.vacuformer.eu



Bleach Tray Spacer

- Use Cavex Bleach Tray Spacer to create reservoirs in bleaching trays
 - Only apply Cavex Bleach Tray Spacer to the plaster mould. Only apply to the labial or buccal surfaces of the bleaching elements
 - Apply a film of 1 to 1.5 mm.
 - Keep within approx. 1 mm from the edge of the gingiva
 - Harden with a curing light for 10 sec. per surface



00116AZ

CAVEX YOUR IMPRESSION IS OUR CONCERN



Cavex Holland BV
P.O. Box 852
2003 RW Haarlem
The Netherlands

T +31 23 530 77 00
F +31 23 535 64 82
dental@cavex.nl
www.cavex.nl

Protokoll Cavex VacuFormer

Gebrauchsanweisung



1 Drehen Sie das Heizelement nach hinten, schieben Sie den Rahmen an den 2 schwarzen Griffen ganz nach oben und öffnen Sie ihn.




2 Stellen Sie den Timer auf ca. 10 Minuten und den Schalter auf HEATING (-) ein. Die HEATING (=) Lampe leuchtet jetzt. Lassen Sie das Gerät ca. 2 Minuten vorheizen. Das Heizelement muss rotglühend sein.



3 Legen Sie die Tiefziehfolie in den Rahmen ein. Schließen Sie den Rahmen und ziehen Sie den schwarzen Knopf fest an. Verwenden Sie vorzugsweise ein zur Hufeisenform zurückgeschnittenes Gipsmodell. Achten Sie darauf, dass sich der Gipsabdruck in der Mitte der Vakuumplatte befindet.



4 Drehen Sie das vorgeheizte (deutlich glühende) Heizelement über den Rahmen.

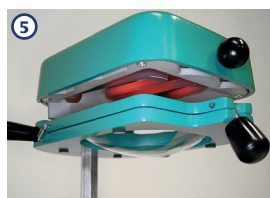


5 Die Tiefziehplatte wird jetzt erwärmt- und biegt sich langsam durch.



6 Wenn die Platte ca. 3 cm durchgebogen ist, stellen Sie den Druckschalter auf VACUUM (=) und drücken den Rahmen sofort in einer Bewegung nach unten.



7 Drehen Sie das Heizelement wieder nach hinten und lassen Sie den Vakuummotor noch ca. 40 Sekunden laufen. Warten Sie nach dem Ausschalten des Vakuummotors noch 2 bis 5 Minuten, bevor Sie den Rahmen öffnen.

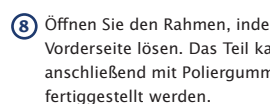

8 Öffnen Sie den Rahmen, indem Sie den schwarzen Knopf an der Vorderseite lösen. Das Teil kann jetzt ausgeschnitten und anschließend mit Poliergummi und -bürsten Ihrer Wahl fertiggestellt werden.

Spezielle Anweisungen

Allgemeines

- Bewegen Sie den Rahmen ausschließlich mit zwei Händen an den schwarzen Griffen auf oder ab.
- Auf www.vacuformer.eu finden Sie unter "available information" häufig gestellte Fragen (Frequently Asked Questions) und die entsprechenden Antworten

Gebisschutz

!! Achtung: Bei dieser Indikation nicht vorheizen !!

- Langsam direkt über dem Rahmen mit der Gebisschutzplatte aufwärmen (verwenden Sie ein abgekühltes Gerät).
- Kürzen Sie den Gebisschutz für mehr Tragekomfort bis zur Mitte des 1. Molars.
- Verleihen Sie den Rändern einen schönen Glanz, indem Sie einen Gasbrenner mit blauer Flamme an diesen vorbei bewegen.

Weitere Tipps unter: www.vacuformer.eu

Splint

- Entfernen Sie die blaue Folie (2 Seiten)
- Kühl und trocken aufbewahren; das Material ist etwas hygroskopisch
- Entfernen Sie wegen der Steifheit so viel wie möglich überschüssiges Material, bevor Sie den Splint vom Gipsmodell lösen

Weitere Tipps unter: www.vacuformer.eu

Bruxism und Splint X-heavy

- Entfernen Sie die blaue Folie (2 Seiten)
- Kühl und trocken aufbewahren; das Material ist etwas hygroskopisch
- Z.B. mit einem kleinen Sägerad ausschneiden.

Weitere Tipps unter: www.vacuformer.eu

Bleach

- Für optimalen Komfort und, um zu vermeiden, dass das Bleichgel längere Zeit mit der Gingiva in Berührung kommt, am Gingivarand entlang ausschneiden

Weitere Tipps unter: www.vacuformer.eu

Bleach Tray Spacer

- erwerben Sie den Cavex Bleach Tray Spacer, um Reservoirs in den Bleichlöffeln zu schaffen
- Bringen Sie den Cavex Bleach Tray Spacer ausschließlich auf dem Gipsmodell an. Nur auf den labialen/buccalen Flächen der zu bleichenden Elemente anbringen
- ringen Sie eine Schichtdicke von 1 bis 1,5 mm an
- Halten Sie einen Abstand von ca. 1 mm zum Gingivarand
- Jede Oberfläche 10 Sekunden lang mit Licht härten

