


C02-M mini

LED-Lichthärtungsgerät mit direktem Lichtkopf


- ultraleicht, müheloses Aushärten, maximaler Komfort
- **2 Modi:** Vollaushärtung & sanfte Aushärtung
- **6 Zeiteinstellungen:** 5, 10, 15, 20, 25, 30 s
- flacher Lichtkopf aus Edelstahl (10 mm Durchmesser)
- Lichtkopf um 360° drehbar
- austauschbarer Akku
- 10 Farben
- **Garantie:** 24 Monate

LIEFERUMFANG:


- C02-M-Lichthärtungshandstück mit Ladestation
- **C02-M-1** 10-mm-Direktlichtkopf
- **C01/2-M-2** Schutzblende
- **C02-3** autoklavierbare Hitzeschutzringe (6 Stück/Packung)
- USB-Typ-C-Kabel & EU-Stecker
- **228** Einweg-Schutzhüllen (100 Stück/Schachtel)

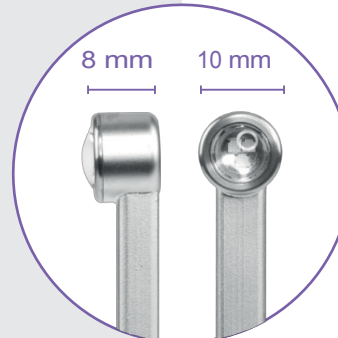


Für die okklusale und linguale Oberfläche optimierter Bestrahlungswinkel

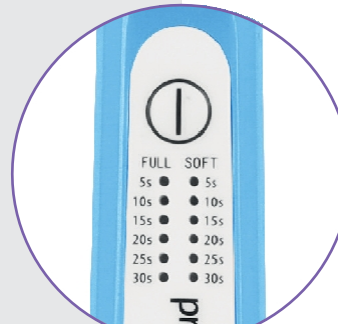


2 Grundmodi
6 Zeitmodi

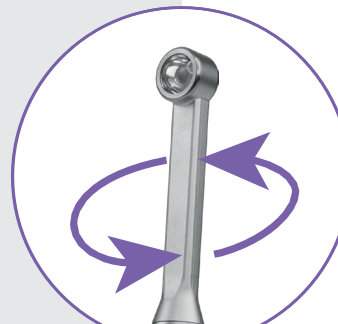

Um 360° drehbarer Kopf

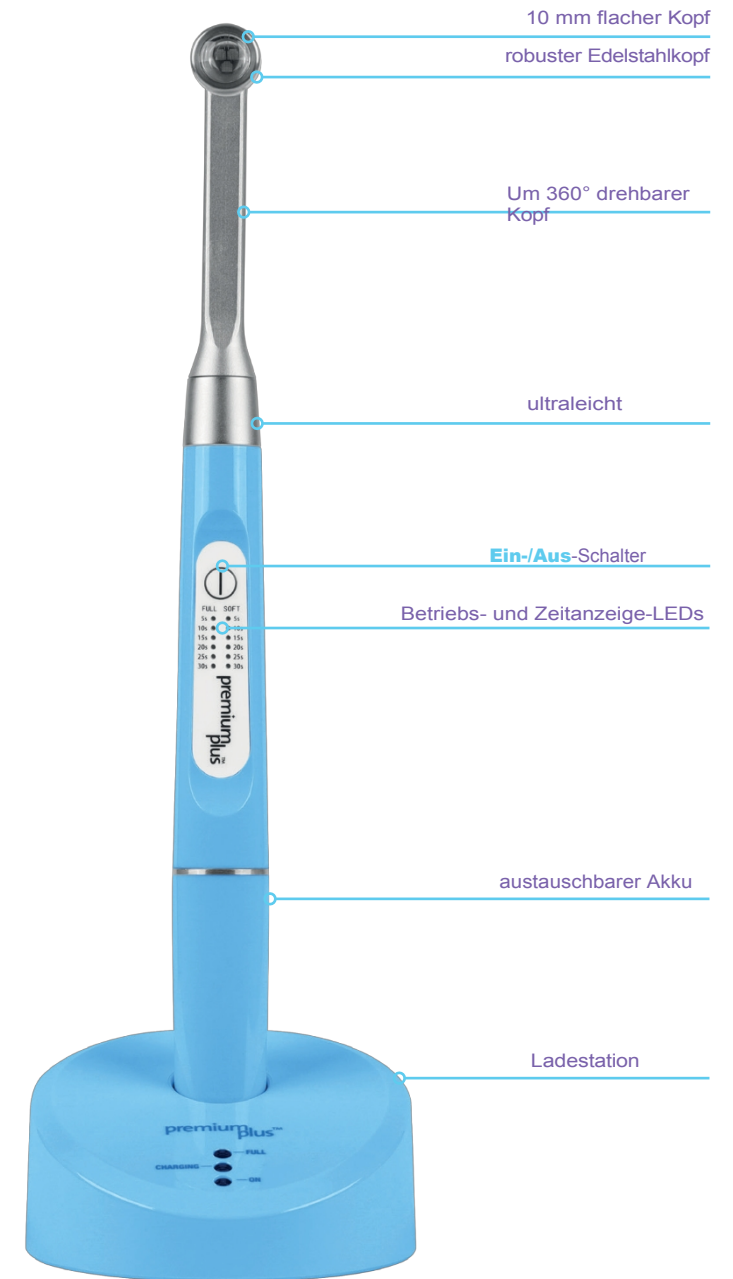

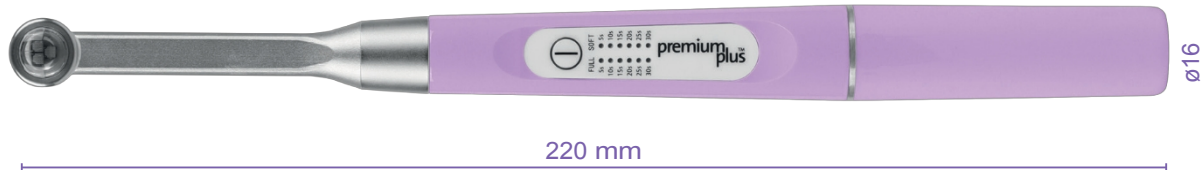

Wellenlänge
440 ~ 480 nm

Lichtintensität bis zu
1200 mW/cm²

Gewicht
84 g

10 Farben



jetzt 50 %
leichter!

2 Modi

MODI	ANWENDUNG	TECHNISCHE DATEN
VOLL	Für allgemeine Anwendungen	1.200 mW/cm ² für 5, 10, 15, 20, 25, 30 Sekunden ±10 %
SANFTE BEHANDLUNG	Die ersten 0–5 Sekunden werden für eine schonendere Behandlung langsam hochgefahren; konzipiert für Patienten, die empfindlich auf Hitze reagieren.	Die ersten fünf Sekunden von 0–900 mW/cm ² ±10 %, die nächsten 5, 10, 15, 20, 25, 30 Sekunden 900 mW/cm ² ±10 %

