


LASERTECH

2UALTECH

COMPOSITE CEMENT



2QUALTECH

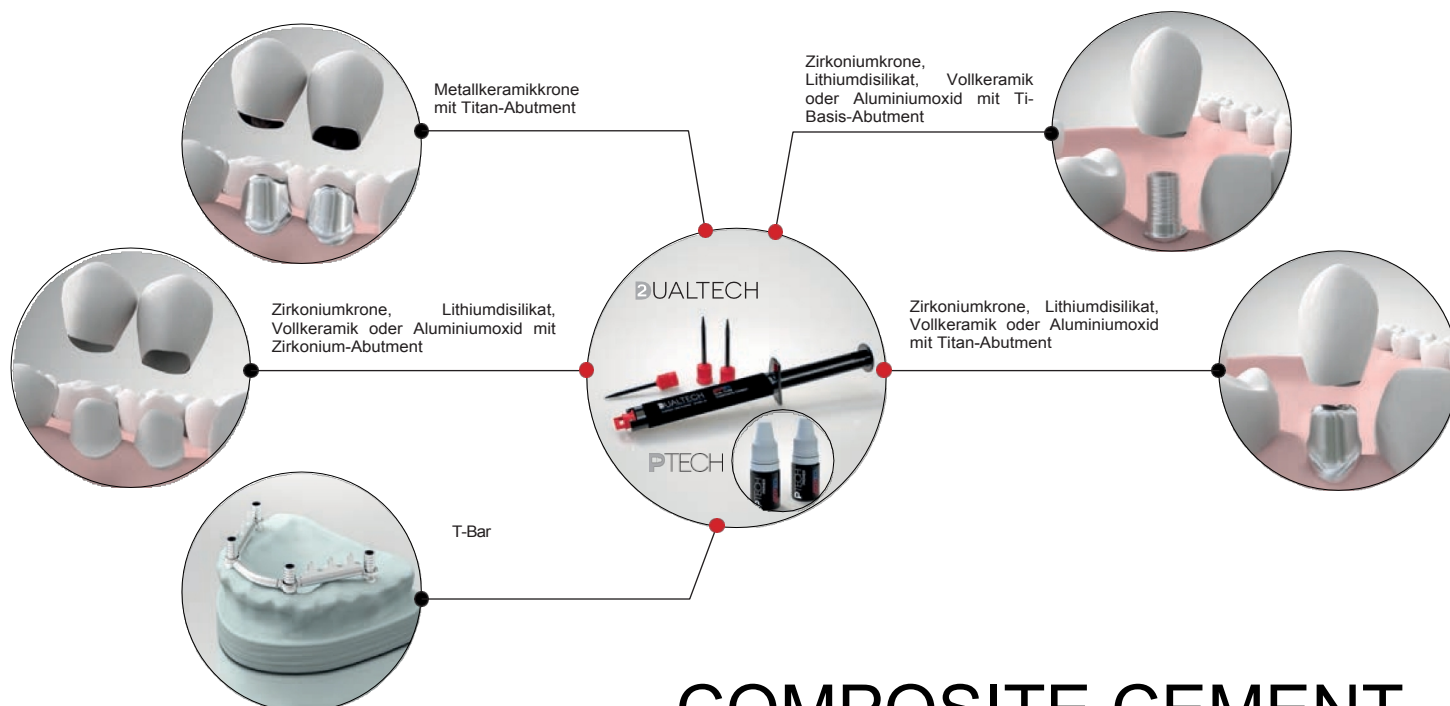

COMPOSITE CEMENT

DualTech ist ein OB White Opaque, ein mikrohybrides Methacrylat-Dichtungsmittel. Seine besondere Zusammensetzung macht es selbsthärtend und garantiert unter allen Anwendungsbedingungen eine hervorragende Opazität. DualTech wird sowohl im Labor als auch in der Praxis erfolgreich eingesetzt, wenn das Verkleben von Metallteilen wie z. B. die Anbringung von Zahnbefestigungen, das Verkleben von Brücken und Keramik-Metallkronen, Zirkonium, Lithiumsilikat und Aluminiumoxid erforderlich ist. Um die Haftung zwischen den zu zementierenden Teilen deutlich zu erhöhen, wird die Verwendung von Primer P-TECH empfohlen. Wir empfehlen die Verwendung von Lichthärtungslampen mit einer Belichtungszeit von 20 bis 30 Sekunden; es ist jedoch auch möglich, die Selbsthärtungseigenschaft von DualTech mit einer Aushärungszeit von 7 bis 8 Minuten zu nutzen. DualTech ist auch ein unverzichtbares Werkzeug für die Arbeit mit der gesamten Palette der T-Bar-Produkte, da es nicht nur bemerkenswert einfach anzuwenden ist, sondern auch seine Dichtigkeit über lange Zeit beibehält, mit reduzierten Trocknungszeiten und vor allem ohne Schrumpfung und Verwindungen, die die Integrität der Struktur beeinträchtigen könnten.

2QUALTECH



56,00 €

PTECH



56,00 €

Ref.	Beschreibung/description	Menge
DT	2QUALTECH mit 10 selbstmischende Spitzen • Inklusive	1 Stück à 5 ml 10 selbstmischende Spitzen
PT	PRIMER	1 x 5 ml

LASERTECH

PTECH

PRIMER 5,0 ml

Metall – Metall
Metall – Zirkonium
Metall – Lithiumdisilikat,
Metall – PMMA.





Innovativer Einkomponenten-Primer zur deutlichen Erhöhung der Haftwerte zwischen indirekten Restaurationen aus verschiedenen Materialien und kunststoffbasierten Komposit-Zementen. Er kann zur Oberflächenbehandlung von Zirkonoxid-Restaurationen und anderen Arten von Metallmaterialien oder Legierungen verwendet werden.

Sie ermöglicht es, Haftwerte zu erzielen, die von Zirkonoxid, Aluminiumoxid und anderen Metalllegierungen nicht erreicht werden. Sie ist mit selbsthärtenden, lichthärtenden und dualhärtenden Kunststoffzementen kompatibel und einfach in der Anwendung.

Mit dem PTECH Primer lassen sich hervorragende Haftwerte zwischen

Metall – Metall

Metall – Zirkonium

Metall – Lithiumdisilikat,

Metall – PMMA.

erzielen.

Es ist mit selbst- und lichthärtenden Dual-Härtungs-Kunststoffzementen kompatibel.

Nach dem Auftragen auf beide Oberflächen müssen Sie etwa 10 bis 15 Sekunden warten, um sicherzustellen, dass die Oberflächen für die Zementierung bereit sind.

PTECH



Ref.	Beschreibung/description	Menge
PT	PRIMER	1 x 5 ml

56,00 €

Preise zzgl Mehrwertsteuer / Lieferung ab Werk