

C01-M mini

LED- Lichthärtungsgerät mit Lichtleiter aus Glasfaser


- ultraleicht, müheloses Aushärten, maximaler Komfort
- **2 Modi:** Vollaushärtung & sanfte Aushärtung
- **6 Zeiteinstellungen:** 5, 10, 15, 20, 25, 30 s
- autoklavierbarer Lichtleiter aus Glasfaser (8 mm Durchmesser)
- Lichtleiter um 360° drehbar
- austauschbarer Akku
- 10 Farben
- **Garantie:** 24 Monate

LIEFERUMFANG:

- **C01-M** Lichthärtungshandstück mit Ladestation
- **C01-M-1** 8-mm-Glasfaser-Lichtleiter
- **C01/2-M-2** Schutzblende
- USB-Typ-C-Kabel & EU-Stecker
- **228** Einweg-Schutzhüllen (100 Stück/Schachtel)



8-mm-Lichtleiter
aus Glasfaser

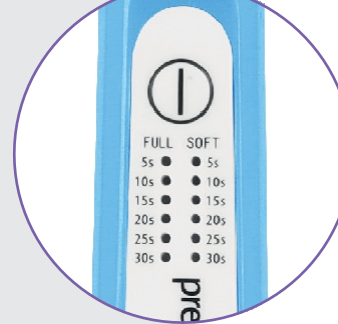

2 Grundmodi
6 Zeitmodi



um 360° drehbarer Kopf



Um 360° drehbarer
Kopf

ultraleicht

Ein-/Ausschalter **Zeit-/Modus-**
Anzeige

Anzeigeleuchten für Modus und
Zeit

austauschbarer Akku

Ladestation



Wellenlänge
440 ~ 480 nm

Lichtintensität bis zu
1200 mW/cm²

Gewicht
86 g

10 Farben



jetzt 50 %
leichter!

2 Betriebsmodi

MODI	ANWENDUNG	TECHNISCHE DATEN
VOLL	Für allgemeine Anwendungen.	1.200 mW/cm ² für 5, 10, 15, 20, 25, 30 Sekunden ±10 %
SANFTE BEHANDLUNG	Die ersten 0–5 Sekunden werden für eine schonendere Behandlung langsam hochgefahren; konzipiert für Patienten, die empfindlich auf Hitze reagieren.	Die ersten fünf Sekunden von 0–900 mW/cm ² ±10 %, die nächsten 5, 10, 15, 20, 25, 30 Sekunden 900 mW/cm ² ± 10 %

